

Lancette de Sécurité – Nouvelle génération

Prélèvement simple et sûr - Confort du patient accru



Sécurité pour l'utilisateur et le patient

- L'aiguille ou la lame stérile est protégée dans le corps de la lancette avant et après usage, afin d'éviter tout risque de blessure
- Le blocage automatique du dispositif ne permet pas une réutilisation et élimine les contaminations croisées
- Le bouton sécurisé de déclenchement prévient d'une activation accidentelle


Prélèvement simple

- Pré-activé et prêt à l'emploi
- L'ergonomie du corps de la lancette procure une préhension sûre
- Surface de contact réduite pour une ponction précise

Confort du patient

- Lames siliconées lisses et aiguilles triple biseau pour réduire la douleur
- Profondeurs de pénétration définies pour un prélèvement optimal chez l'adulte et l'enfant
- Profondeur de pénétration contrôlée pour éliminer le risque de lésion osseuse

Lancette de Sécurité – Nouvelle génération

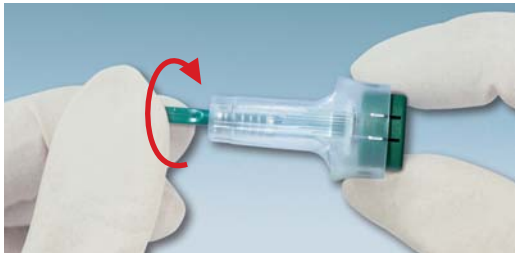

❶ Tourner la languette de protection jusqu'à ce qu'elle se sépare du dispositif.



❷ Appuyer la lancette de sécurité fermement sur le site de ponction préalablement désinfecté puis presser le bouton déclencheur.



❸ Eliminer la lancette de sécurité dans un container à aiguilles.

Informations pour commander

Référence	Désignation	Taille	Profondeur de pénétration	Conditionnement
85.1015	Lancette de sécurité Mini	28 G	1,6 mm	200 par boîte 1200 par carton
85.1016	Lancette de sécurité Normal	21 G	1,8 mm	200 par boîte 1200 par carton
85.1017	Lancette de sécurité Extra	18 G	1,8 mm	200 par boîte 1200 par carton
85.1018	Lancette de sécurité Super	Lame 1,5 mm	1,6 mm	200 par boîte 1200 par carton
85.1019 (Pour les talons des bébés)	Lancette de sécurité Néonatal	Lame 1,5 mm	1,2 mm	200 par boîte 1200 par carton

Les systèmes de prélèvement sanguin capillaire Microvette® complètent cette gamme de produits



Microvette® 100/200
Prélèvement sanguin avec
capillaire End-to-End



Microvette® 300/500
Prélèvement avec
collecteur intégré

Informations complémentaires disponibles sur simple demande.

SARSTEDT France
Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay
Tél.: 03 84 31 95 95
Fax: 03 84 31 95 99
info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com