

# Βοήθημα ανοίγματος συνοδών σωληνίσκων ασκών αίματος

Εύκολη και ασφαλής δειγματοληψία από τους συνοδούς σωληνίσκους





## Βοήθημα ανοίγματος συνοδών σωληνίσκων

- Ελαχιστοποίηση του κινδύνου μόλυνσης και προσωπικού τραυματισμού
- Δεν απαιτούνται εργαλεία όπως μαχαίρια ή ψαλίδια
- Εύκολος και ασφαλής χειρισμός



# Βοήθημα ανοίγματος συνοδών σωληνίσκων

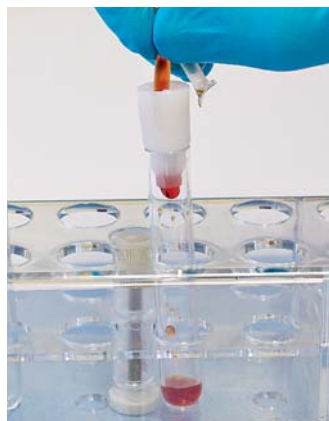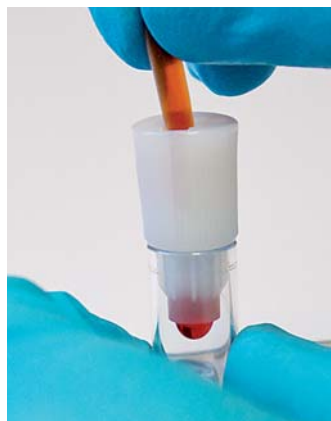

Εισαγάγετε το τμήμα εύκαμπτου σωλήνα υπό ελαφριά γωνία μέσα στο βοήθημα ανοίγματος συνοδών συνοδών σωληνίσκων και ωθήστε το προς τα εμπρός χωρίς να συμπιέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα.

Τώρα πιέστε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα μία φορά για να απελευθερώσετε μια μικρή σταγόνα αίμα.

Για να αδειάσετε το τμήμα του εύκαμπτου σωλήνα, διπλώστε και συμπιέστε τον εύκαμπτο σωλήνα. Οι σταγόνες αποφεύγονται απελευθερώνοντας την πίεση πριν την αφαίρεση του τμήματος από το βοήθημα ανοίγματος συνοδών σωληνίσκων.



## Πληροφορίες παραγγελιών

Αρ. παραγγελίας	Περιγραφή	Συσκευασία
95.1000	Βοήθημα ανοίγματος τμήματος συνοδών σωληνίσκων	2.000/κουτί
95.1000.476	Βοήθημα ανοίγματος τμήματος συνοδών σωληνίσκων με σωληνάριο 75 x Ø 12 mm, συναρμολογημένο	400/κουτί, συσκευασία στοιβαξής
95.1000.800	Βοήθημα ανοίγματος τμήματος συνοδών σωληνίσκων για σωληνάριο με εσωτερική Ø 8,2 mm	2.000/κουτί
55.476	Σωληνάριο 75 x Ø 12 mm, PS	2.000/κουτί, συσκευασία στοιβαξής
55.476.005	Σωληνάριο 75 x Ø 12 mm, PS	2.000/κουτί
86.1509	Σωληνάριο 75 x Ø 11,5 mm, γυάλινο	2.352/κουτί, συσκευασία στοιβαξής

SARSTEDT M.E.Π.Ε.  
Χρ. Μπέκα & Αγ. Δημητρίου  
190 04 Σπάτα Αττικής  
Τηλ. +30 210 6038274  
Fax +30 210 6038276  
info.gr@sarstedt.com  
www.sarstedt.com