


5 ml Reagiergefäße

Die Zwischengröße für das Labor



Das Reagiergefäß für mittlere Volumina:

- Komfortables Handling von Füllmengen zwischen 2 und 5 ml
- Zuverlässiges SafeSeal-Verschlussprinzip
- PCR Performance-Tested-Qualität für anspruchsvollere Anwendungen
- Biosphere® Plus für maximale Sicherheit gegenüber etwaiger Kontamination

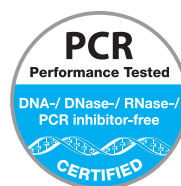

Zuverlässiges Handling von Füllmengen zwischen 2 und 5 ml

Routineanwendungen im Labor wie Verdünnungsreihen, Zellaufschluss oder Probenrückstellung erfordern oft eine Füllmenge über 2 ml. Gefäße mit einem größeren Volumen sind hierfür oftmals auf Grund ihres schlanken Designs oder ihres Schraubverschlusses nicht optimal geeignet.

Das neue Sarstedt Reagiergefäß vereint die Vorteile von SafeSeal-Reagiergefäßen und 5 ml Schraubröhren in einem Gefäß. Durch das ergonomische Design mit einer Hand leicht zu öffnen, schließen die Schnapdeckel mit Dichtlippe und Haltenocken auch bei thermischer Belastung sicher. Die breite Deckelanbindung ermöglicht einfaches und präzises Verschließen. Das Vertauschen separater Schraubdeckel ist ausgeschlossen.



Produktvorteile des 5 ml Reagiergefäßes

- Robustes Polypropylen – zentrifugierbar bis 21.000 x g, autoklavierbar
- Eingespritzte Skalierung – einfache Volumenkontrolle
- Schriftfeld und gefrosteter Deckel – sichere Kennzeichnung und schnelle Identifizierung
- Niedrige Höhe – geringes Kontaminationsrisiko, der Pipettenkonus muss nicht in das Gefäß eintauchen
- Kompakte Größe – platzsparende Rückstellung von Proben, Medien oder Kulturen

Bestellinformation

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Verpackung
72.701	5ml Reagiergefäß	100 / Beutel 800 / Karton
72.701.400	5ml Reagiergefäß, PCR Performance Tested	100 / Beutel 800 / Karton
95.1298	5ml Reagiergefäße Zentrifugenadapter	8 / Beutel 96 / Karton



Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Format	Außenmaße (mm)	Verpackung
93.850.001	Polycarbonat-Ständer für 18 St. 5 ml Reagiergefäße	6 x 3	137 x 70 x 40 (L x B x H)	1 / Karton
93.1431.001	Polycarbonat-Ständer für 48 St. 5 ml Reagiergefäße	12 x 4	257 x 90 x 40 (L x B x H)	1 / Karton

SARSTEDT AG & Co. KG
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
Telefon: +49 2293 305 0
Telefax: +49 2293 305 3450
Kundenservice Deutschland
Telefon 0800 0 83 305 0
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com