


# Produits PCR Low Profile

Optimisés pour la « PCR rapide »

NOUVEAU !

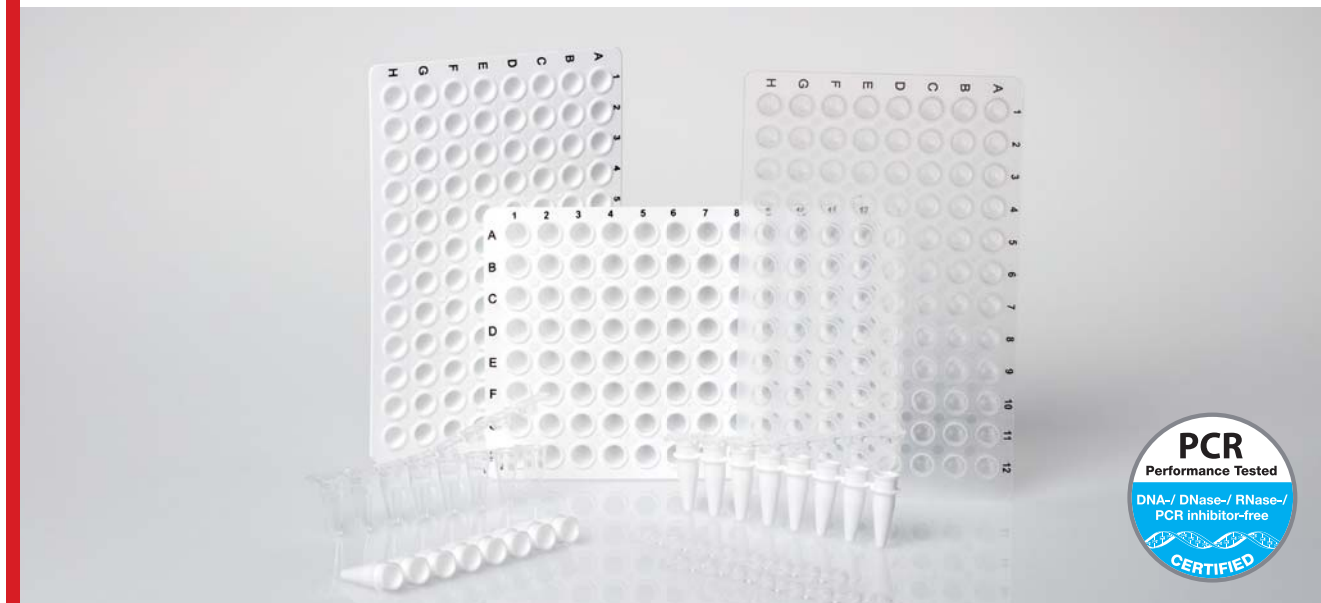

Les nouvelles barrettes et plaques PCR Low Profile conviennent spécifiquement aux petits volumes de réactifs de moins de 20 µl et sont nécessaires pour les « thermocycleurs de PCR rapide » (format de bloc de 0,1 ml).

## Caractéristiques du produit:

- De par la conception Low Profile, le mélange réactif PCR dispose de moins d'espace pour passer en phase gazeuse, lors du réchauffement. On constate donc une réduction de la condensation sur les parois et un maintien constant des conditions de réaction.
- Un design extrêmement homogène et fin pour un transfert de température rapide dans l'espace de réaction.
- Des variantes blanches sont disponibles pour une détection optimale de la fluorescence dans le cadre de la qPCR.
- Certifiés exempts d'ADN humain, d'ADN bactérien, de DNase, de RNase et d'inhibiteurs de la PCR: ils conviennent de manière optimale aux exigences requises pour les manipulations avec des acides nucléiques.

## Références pour commande

Référence	Désignation	Conditionnement
72.982.002	Barrette Multiply®-µStripPro LP, transparente ; avec barrette de bouchons	125/1250
72.982.092	Barrette Multiply®-µStripPro LP, blanche ; avec barrette de bouchons	125/1250
72.1977.202	Plaque PCR Multiply®, transparente	20/100
72.1977.232	Plaque PCR Multiply® LP, blanche	20/100

SARSTEDT S.A.R.L.  
Route de Gray  
Z.I. des Plantes  
70150 Marnay  
Tel: +33 384 31 95 95  
Fax: +33 384 31 95 99  
info.fr@sarstedt.com  
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**