

Drenáž moču

Produktové riešenia
pre individuálnu starostlivosť
o pacientov



A06 W

- ✓ Bezihlové a ploché miesto odberu
- ✓ Pripojenie výmenného vaku s bajonetovým uzáverom
- ✓ Univerzálne pripojenie s elastickými popruhmi a dodatočnými držiakmi
- ✓ Výmenné vaky sú dostupné v objeme 2.000 ml a 3.000 ml




Presné odčítanie objemu



Presná a jednoducho čitateľná graduácia umožňuje presné odčítanie. Celkový merací objem je 500 ml a jasná a stručná graduácia umožňuje presné meranie veľkých objemov moču. Objemy presahujúce 500 ml sú automaticky odvádzané cez integrovanú prietokovú komôrku a odvádzané do zberného vaku.

Hygienický a užívateľsky pohodlný výmenný vak

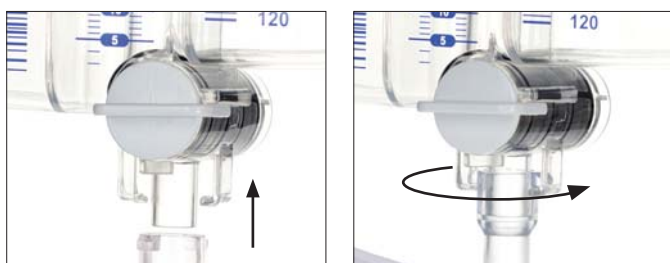

Bajonetový uzáver umožňuje rýchlu a hygienickú výmenu vaku a bezpečné pripojenie k meracej komôrke.

DEHP free



Bezihlový odber vzorky



Bezihlové, ploché miesto odberu pre bezpečnú dezinfekciu a odber vzoriek.

UD 3PLUS

- ✓ Bezihlové a ploché miesto odberu
- ✓ Veľký dvojitý držiak
- ✓ 2 dĺžky hadičiek: 100 cm a 120 cm
- ✓ Objem 2.000 ml



Systém pre imobilných pacientov

Uzavretý drenážny systém pre hygienickú starostlivosť o katetrizovaných pacientov s dlhodobým pobytom na lôžku.

Veľký dvojitý držiak



Veľký dvojitý držiak umožňuje jednoduché a bezpečné pripojenie k zábradliu postele.

Odkvapkávací komôrka



S hydrofóbnou ventiláciou pre optimálnu kompenzáciu tlaku a prietok moču. Odkvapkávací komôrka umožňuje optimálnu ochranu pred vzostupnou migráciou baktérií. Horizontálny membránový spätný ventil zaisťuje optimálny prietok moču od malých po veľké objemy a zabraňuje refluxu moču bez ohľadu na polohu drenážneho vaku.

DEHP free



Bezihlový odber vzorky



Bezihlové, ploché miesto odberu pre bezpečnú dezinfekciu a odber vzoriek.

TUR-BAG

- ✓ Bezihlové a ploché miesto odberu vzorky
- ✓ Dostupný s a bez pumpovacieho balónika
- ✓ Objem 4.000 ml



Vak na výplach močového mechúra

Uzavretý močový drenážny systém na pooperačný výplach močového mechúra.

Pumpovací balónik



S pumpovacím balónikom na kontrolovaný pooperačný výplach močového mechúra zvlášť po resekcii prostaty.

Bezihlový odber vzorky



Bezihlové, ploché miesto odberu pre bezpečnú dezinfekciu a odber vzoriek.

DEHP free



DRENÁŽNY VAK

- ✓ Univerzálny krokový konektor s integrovanou prepichovateľnou membránou na odber moču
- ✓ Drenážna hadička s veľkým priemerom pre optimálny prietok moču
- ✓ Objem 2.000 ml



DEHP free

Drenážny vak pre optimálnu starostlivosť o pacienta

Drenážny vak je vybavený extra silnou fóliou a hydrofóbnym odvetrávaním vaku odolným voči baktériám.

T-výpustný ventil



Jednoducho ovládateľný T-výpustný ventil a účinná ochrana pred kontamináciou

Bezihlový odber vzorky



Bezihlové, ploché miesto odberu pre bezpečnú dezinfekciu a odber vzoriek.




VAKY NA MOČ A SEKRÉTY

- ✓ Univerzálny krokový konektor
- ✓ Vaky na moč a sekréty sú dostupné v objeme 1.500 ml a 2.000 ml
- ✓ Dĺžka hadičky: 90 cm
- ✓ Dostupné v sterilnej aj nesterilnej verzii



Antirefluxný ventil

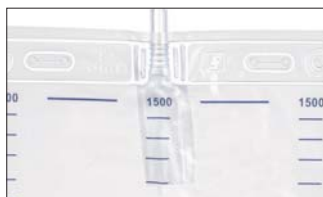

Anti-refluxný ventil spoľahlivo zabraňuje spätnému toku moču.

Push-pull výpustný ventil




Push-pull výpustný ventil umožňuje rýchle, jednoduché a hygienické vyprázdnenie vaku.

Luer-Lock konektor



Luer-Lock konektor (zasúvací) umožňuje bezpečné pripojenie k (žilovým) výpustiam.

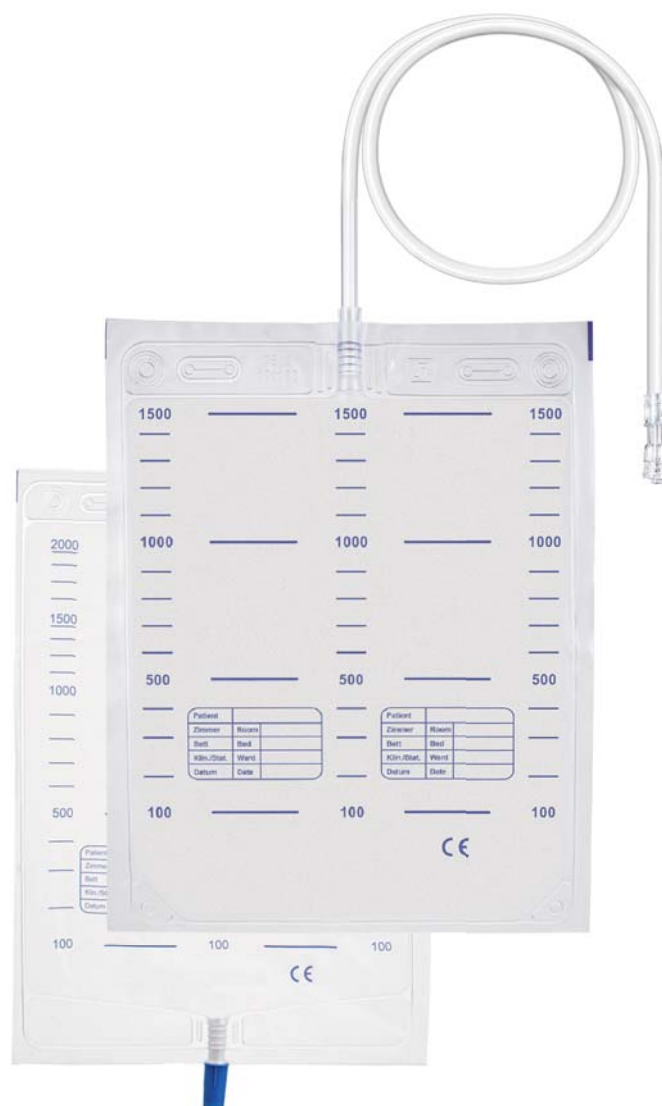

UROSTRETCH

- ✓ Bez kontaktu nožného vaku s pokožkou
- ✓ Fixácia povrchu nožného vaku po celej dĺžke
- ✓ Zníženie zvuku kvapaliny



UroStretch uchytenie nožného vaku



Rúrkový obvaz zo strečovej tkaniny na pripevnenie nožného vaku. Použiteľné so všetkými nožnými vakmi do 750 ml. UroStretch je opakovane použiteľný, umývateľný v teplej vode (40 °C) a ponúka vysoký užívateľský komfort.



INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVANIE



Merací systém moču A06 W

REF	Popis	Ks./Box
74.5681.200	Merací systém moču A06 W 500 ml s 2.0 l výmenným vakom bez výpustného ventilu, s elastickými popruhmi a doplnkovými držiakmi, individuálne balený, sterilný	10
74.5684.001	Výmenný vak 2.0 l pre A06 W bez výpustného ventilu, individuálne balený, sterilný	50
74.5684.002	Výmenný vak 3.0 l pre A06 W s výpustným ventilom, individuálne balený, sterilný	50
74.5685.001	Výmenný vak 3.0 l pre A06 W bez výpustného ventilu, individuálne balený, sterilný	50
74.5685.002	Výmenný vak 2.0 l pre A06 W s výpustným ventilom, individuálne balený, sterilný	50

UD 3plus

REF	Popis	Ks./Box
74.5330.500	UD 3plus merací drenážny systém 2.0 l, s dvojitém držiakom, dĺžka hadičky 100 cm, indiv. balený, sterilný	20
74.5330.520	UD 3plus merací drenážny systém 2.0 l, s dvojitém držiakom, dĺžka hadičky 120 cm, indiv. balený, sterilný	20

TUR-BAG

REF	Popis	Ks./Box
74.5340.500	TUR-BAG 4.0 l s pumpovacím balónikom, dĺžka hadičky 100 cm, individuálne balený, sterilný	10
74.5340.501	TUR-BAG 4.0 l bez pumpovacieho balónika, dĺžka hadičky 100 cm, individuálne balený, sterilný	20

Drenážny vak

REF	Popis	Ks./Box
74.5485.005	Drenážny vak 2.0 l, s antirefluxným ventilom, T-výpustou, dĺžka hadičky 100 cm, individuálne balený, sterilný	50



Vaky na moč a sekrety

REF	Popis	Ks./Box
74.5218.101	Vak na moč 1.5 l s antirefluxným ventilom, push-pull výpustným ventilom, dĺžka hadičky 90 cm, nesterilný	150
74.5228.101	Vak na moč 2.0 l s antirefluxným ventilom, push-pull výpustným ventilom, dĺžka hadičky 90 cm, nesterilný	150
74.5228.005	Vak na moč 2.0 l s antirefluxným ventilom, push-pull výpustným ventilom, dĺžka hadičky 90 cm, indiv. bal., sterilný	100
74.5283.101	Vak na moč 1.5 l s antirefluxným ventilom, dĺžka hadičky 90 cm, nesterilný	200
74.5283.005	Vak na moč 1.5 l s antirefluxným ventilom, dĺžka hadičky 90 cm, individuálne balený, sterilný	100
74.5284.101	Vak na moč 2.0 l s antirefluxným ventilom, dĺžka hadičky 90 cm, nesterilný	200
74.5284.005	Vak na moč 1.5 l s antirefluxným ventilom, dĺžka hadičky 90 cm, individuálne balený, sterilný	100
74.5281.101	Vak na moč a sekrety 1.5 l, dĺžka hadičky 90 cm, nesterilný	200
74.5281.005	Vak na moč a sekrety 1.5 l, dĺžka hadičky 90 cm, individuálne balený, sterilný	100
74.5282.101	Vak na moč a sekrety 2.0 l, dĺžka hadičky 90 cm, nesterilný	200
74.5282.005	Vak na moč a sekrety 2.0 l, dĺžka hadičky 90 cm, individuálne balený, sterilný	100
74.5286.005	Vak na žlčové sekrety 1.5 l bez výpustného ventilu, s Luer-Lock, dĺžka hadičky 90 cm, individuálne balený, sterilný	100

UroStretch

REF	Popis	Ks./Box
74.5767.001	UroStretch, veľkosť: malá	10
74.5767.002	UroStretch, veľkosť: stredná	10
74.5767.003	UroStretch, veľkosť: veľká	10
74.5767.004	UroStretch, veľkosť: extra veľká	10

SARSTEDT spol. s r. o.

Pri smaltovni 4
851 01 Bratislava

Tel: +421 232 184 930

info.sk@sarstedt.com
www.sarstedt.com