



NFT-

urineopvangsysteem

Monstername met hygiënisch
gesloten en naaldvrije overdracht



NFT

Needle Free Transfer

Preanalyse
van urine
2.0

Het eerste urineopvangsysteem van SARSTEDT voor hygiënisch gesloten en naaldvrije overdracht

Hygiënisch. Praktisch. Veilig.

Hoe kan het verzamelen van urinemonsters nog veiliger, hygiënischer en gemakkelijker worden gemaakt? Het antwoord op deze vraag wordt gegeven door de innovatieve producten van het NFT-systeem. Als eerste gesloten en naaldvrij urineoverdrachtsysteem van SARSTEDT combineert de nieuwe productfamilie de voordelen van bestaande producten in één oplossing.


Nieuwe standaarden voor de preanalyse van urine



- Verkrijgbaar als NFT-urinebeker en ook als 3-liter NFT-urineverzamelbuis voor 24 uur urineverzameling
- Metaal- en naaldvrij transfersysteem
- Veilig bewaren en transporteren
- Eenvoudige en hygiënische urinetransfer met de Urinemonovette®
- Geen naaldbestendige afvalcontainer nodig voor het afvoeren van NFT-producten

Gewoon praktisch

De Urinemonovette® maakt hygiënisch urinetransfer mogelijk maar is ook geschikt als analysebeker voor teststrips en analysers en als centrifugebuisje voor het verzamelen van sediment

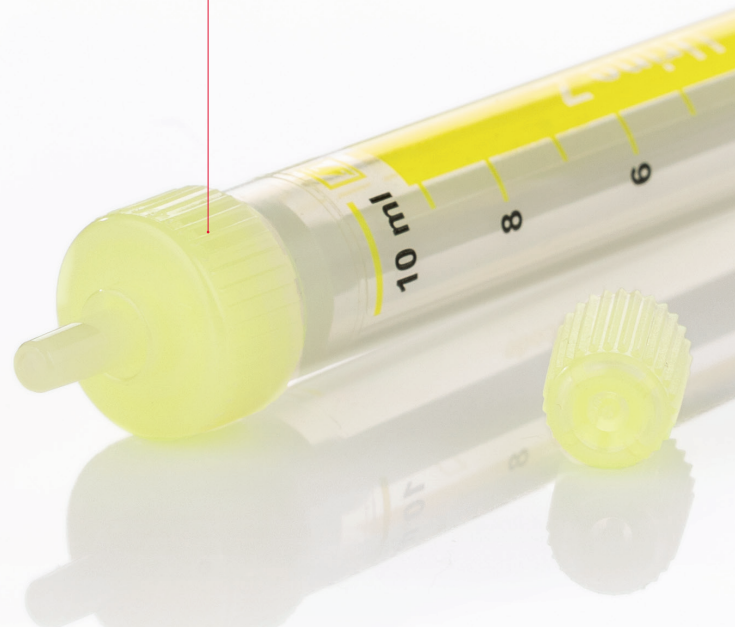


Nieuw

Met de nieuwe naaldvrije opvangfunctie is een naald niet langer nodig. De Urinemonovette® dringt gemakkelijk door het nieuwe NFT-membraan.


Na de gemakkelijke afname wordt de toegang ook na meerdere afnames onmiddellijk weer goed en hygiënisch gesloten.

Er is geen risico op infectie door prikletsel.

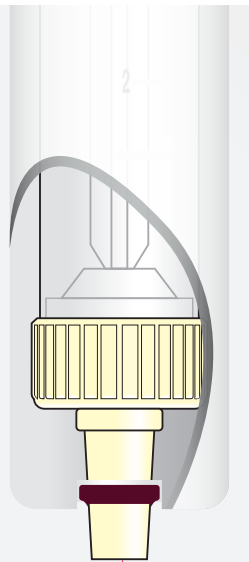

OVERTUIGEND

- ✓ **Minimaal risico van verwondingen** en een **veiligere toepassing** voor personeel en patiënten dankzij naaldvrije monsternam
- ✓ **Besparingen op afvalverwijdering**, omdat de onderdelen van het NFT-systeem niet apart op een prikvrije manier hoeven te worden weggegooid

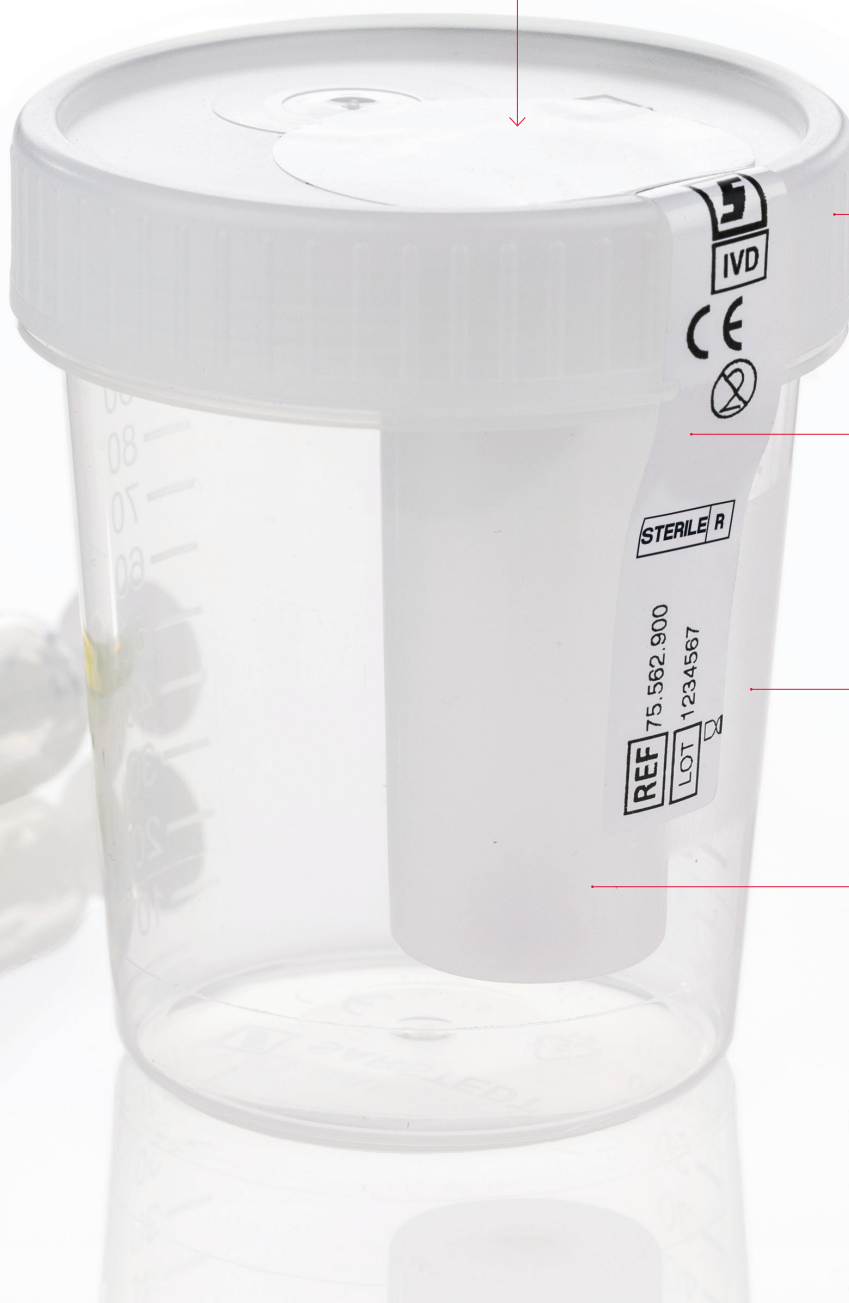

Vloeistof- en reukdicht
schroefdeksel met transfereenheid

Afgesloten
Veiligheidsetiket geeft de interne steriliteit van de NFT-urinebeker aan wanneer het intact is

Een helder zicht
Hoogtransparante beker van robuust polypropyleen (PP) voor een goede visuele beoordeling

Innovatief
Naaldvrije transfereenheid met doordringbaar NFT-membraan

NFT -urineopvangsysteem

Het beste van verschillende systemen

Het NFT-systeem met Urinemonovette®, NFT-urinebeker en NFT-urineverzamel fles garandeert hygiënische werkomstandigheden tijdens het hele monsternamingsproces:

- Met de Urinemonovette® en de bijgeleverde zuigtip kunt u de afnameprocedure zonder naald uitvoeren, zelfs bij zeer kleine volumes. Een aparte transfereenheid zoals bij vacuümsystemen is niet nodig.
- De intuïtieve bediening kan snel en zonder veel training worden aangeleerd.
- Met de Urinemonovette® kan de afname indien nodig worden herhaald door het opzuigprincipe – er is geen risico van functieverlies door verkeerd gebruik.
- Dankzij de geavanceerde, naaldvrije afnamefunctie wordt het risico van letsel bij personeel en patiënten geminimaliseerd.
- Na gebruik hoeven de producten van het NFT-systeem niet apart te worden afgevoerd op een prikvrrije manier – dit bespaart tijd en geld in vergelijking tot producten met een geïntegreerde naald.

Doordacht

De NFT-urineverzamel fles met een volume van 3.000 ml, ergonomische handgreep, grote openingsdiameter en transparant kijkvenster met schaalverdeling in stappen van 100 ml



Urinemonovette® – hygiënisch werken

- De Urinemonovette® maakt hygiënische, naaldvrije transfer uit urineopvangbekers of urineafvoersystemen mogelijk.
- De urine kan direct in de gevulde Urinemonovette® worden geanalyseerd met in de handel verkrijgbare teststrips.
- De Urinemonovette® is geschikt voor transport en verzending volgens verpakkingsvoorschrift P650 van ADR en IATA. Ze kan worden gebruikt voor het verzamelen van sediment in de centrifuge en in analysers.



Gebruiksvriendelijk: Urinepotje NFT



Comfortabel bij 24-uurs urineopvang: Urineverzamel fles NFT



Zelfs met de NFT-urineverzamel fles met groot volume blijft het verzamelen van monsters een schoon proces dankzij de gesloten transferfunctie.



Bekijk de handleiding over het eenvoudige gebruik van NFT-producten: sarstedt.com/nft-tu

BESTEL GRATIS EEN TEST-SET



sarstedt.com/nft-sa



SARSTEDT stelt nieuwe normen met het NFT-urineopvangsysteem

Alleen schone en correcte monsternamen garandeert correcte analyseresultaten. De producten van het NFT-systeem van SARSTEDT stellen normen voor de routinematige en zorgvuldige preanalyse in combinatie met maximale veiligheid voor gebruikers en patiënten.




NFT-producten hoeven niet apart prikveilig te worden weggegooid.

Preanalytical Workflow made by SARSTEDT

Maak gebruik van de synergie van onze op elkaar afgestemde systemen.

Ontdek de 360°-oplossingen voor uw preanalyse van SARSTEDT

sarstedt.com/nft-wf-nl

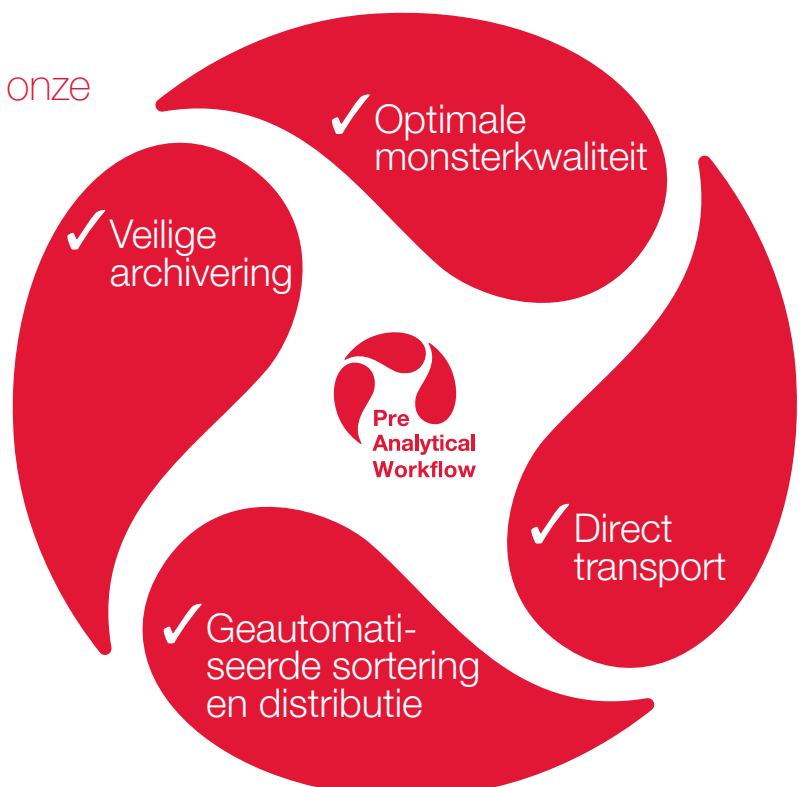

NFT-urinebeker 100 ml

Bestelnr.	Volume	L x Ø	Uitvoering	Zuiverheid	Verpakking (binnen/buiten)
75.562.900	100 ml	72x62 mm	Met veiligheidsetiket en transfereenheid	Steriel	200 / 200

NFT-urineverzamel fles 3,0 l

Bestelnr.	Volume	L x b x h	Uitvoering	Zuiverheid	Verpakking (binnen/buiten)
77.575.900	3000 ml	125 x 130 x 246 mm	Met transfereenheid en patiëntenetiket, openingsdiameter 80 mm	-	30 / 30

Urinemonovette® Z – zonder preparaat

Bestelnr.	Volume	L x Ø	Uitvoering (geel)	Zuiverheid	Verpakking (binnen/buiten)
10.250.001	3,2 ml	75x13 mm	Papieren etiket, beschrijfbaar	-	64/512
10.258	8,5 ml	92x15 mm	Kunststof etiket, transparant	-	64/512
10.258.001	8,5 ml	92x15 mm	Papieren etiket, beschrijfbaar	-	64/512
10.258.020	8,5 ml	92x15 mm	Kunststof etiket, transparant, per stuk in blisterverpakking	Steriel	100/500
10.252	10 ml	102x15 mm	Kunststof etiket, transparant	-	64/512
10.252.001	10 ml	102x15 mm	Papieren etiket, beschrijfbaar	-	64/512
10.252.020	10 ml	102x15 mm	Kunststof etiket, transparant, per stuk in blisterverpakking	Steriel	100/500
10.252.030	10 ml	102x15 mm	Kunststof etiket, transparant, met lichtbescherming	-	64/512

Urinemonovette® boorzuur – met stabilisator voor microbiologische onderzoeken

Bestelnr.	Volume	L x Ø	Uitvoering (groen)	Zuiverheid	Verpakking (binnen/buiten)
10.256.001	3,2 ml	75x13 mm	Papieren etiket, beschrijfbaar	-	64/512
10.256.021	3,2 ml	75x13 mm	Papieren etiket, beschrijfbaar, per stuk in blisterverpakking	Steriel	100/500
10.260.001*	8,5 ml	92x15 mm	Papieren etiket, beschrijfbaar	-	64/512
10.260.021*	8,5 ml	92x15 mm	Papieren etiket, beschrijfbaar, per stuk in blisterverpakking	Steriel	100/500
10.253	10 ml	102x15 mm	Kunststof etiket, transparant	-	64/512
10.253.001	10 ml	102x15 mm	Papieren etiket, beschrijfbaar	-	64/512
10.253.020	10 ml	102x15 mm	Kunststof etiket, transparant, per stuk in blisterverpakking	Steriel	100/500
10.253.021	10 ml	102x15 mm	Papieren etiket, beschrijfbaar, per stuk in blisterverpakking	steriel	100/500

Meer verbruiksartikelen voor preanalyse van urine vindt u op www.sarstedt.com.

*Geplande nieuwe introductie 2e kwartaal 2024

SARSTEDT B.V.
Rithmeesterpark 23 A
4838 GZ Breda
Tel +31 76 501 75 50
Fax +31 76 501 76 26
info.nl@sarstedt.com

SARSTEDT BV
Uitbreidingsstraat 84/3
2600 Berchem
Tel +32 3 541 76 92
Fax +32 3 541 81 03
info.be@sarstedt.com

www.sarstedt.com



Meer informatie,
video's en monsters bestellen:
sarstedt.com/nft

Als u vragen hebt:
We helpen u graag!

Bezoek ook onze website: www.sarstedt.com