

動物に優しく

動物用採血関連製品





動物に優しい 製品



「大型犬には、S-Monovette®を使います。そうすれば、きわめて簡単かつ清潔に片手でも検体の採取が可能です。」



「Multifly®を使用 - カニューレによって、負担がとても少なくなりました。1回穿刺すれば、必要な検体チューブを充填するのに十分な時間が得られます。」



「私たちは、Multivette®を『吸引器』と呼んでいます。これをルーアカニューレと繋ぐだけで、静脈内に針があるうちに、チューブ2、3本に血液を充填できます。」

- ✓ 安全
- ✓ 負担を軽減
- ✓ 衛生的

人間向けプレアナリティクスにおいて何十年もの実績を持つイノベーターとして、SARSTEDT は獣医学の分野においても認められ、衛生面、使いやすさと動物への優しさにフォーカスした多数のソリューションを提供しています。

例えば、S-Monovette®などの製品は、犬や猫などの閉鎖式静脈採血における衛生上の業界標準を打ち立てます。小型哺乳類、鳥類や爬虫類といった非常に小さな患者に固有の要求に対しても、当社は検体採取に適切なソリューションを提供します。

当社の考え抜かれたシステムをお試しになり、日常業務において多くの実用的なメリットがあることをお確かめください。

SARSTEDT 製品による採血。動物に優しいクリニック向け製品。

SARSTEDTの プレアナリティクス

S-Monovette® による採血の大きな利点は、血液を直接、正しく、準備された検体容器に採取できることです。

特別な使い捨て注射器は不要で、血液検体を他のチューブに移す必要はありません。これによって資源を節約し、採血を他の採取方法よりも確実かつ衛生的に行えます。

さらにより持続可能な段ボール梱包で、廃棄コストやゴミの量が抑えられます。



「ほんの数滴しか採血できなくても、マイクロカニューレが開口部で血液が固まるのを防ぐことによって、多くの分析結果を取得できます。」

どの動物にも適したソリューション - さらに動物ウェルフェアをともに目指します。

皆様の動物クリニックには、さまざまな患者が訪れ、それぞれが固有の問題を抱えています。SARSTEDT は、獣医学のプレアナリティクスに適したソリューションをご提供します。

- S-Monovette® - 安全で、負担を軽減する衛生的な大型のペットにおける採血
- Multivette® - 小型のペットでは、静脈に刺すだけで、優しく簡単に採血可能
- マイクロカニューレ - 特にデリケートな動物でも、マイクロチューブや Microvette®などで、1滴残らず確実に採取します
- 血液、尿および糞便検体採取分野の、その他の便利なシステムや個別製品


SARSTEDT における
アニマルヘルスケア
の詳細はこちらから



animalhealthcare.
sarstedt.com



大型のペットにおける 閉鎖式採血

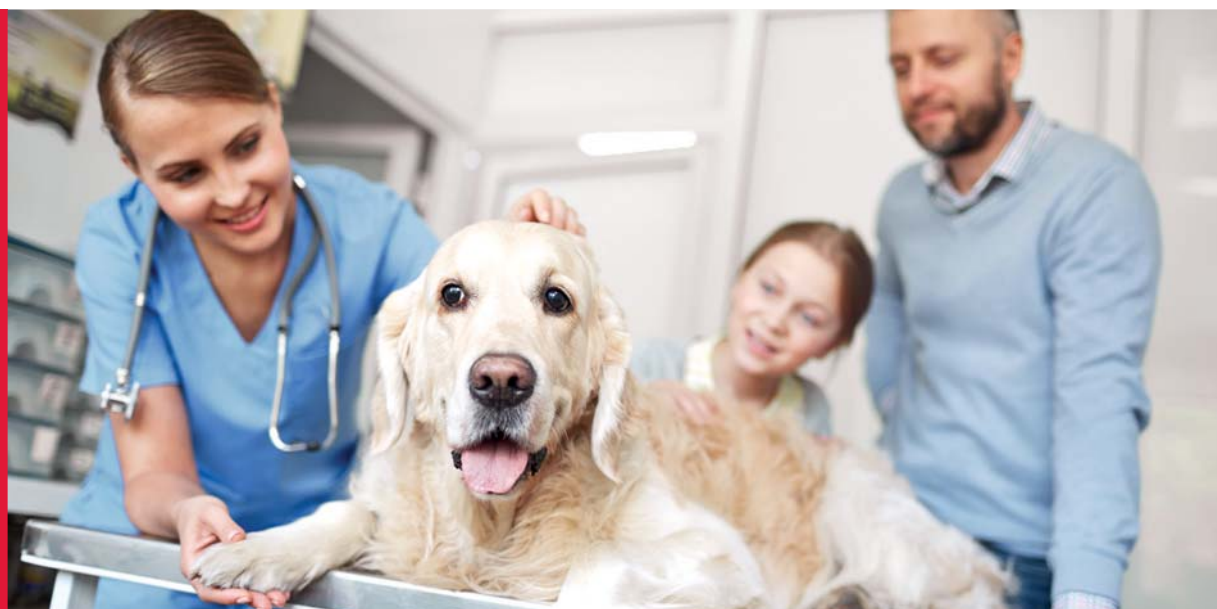


「今日また先生のところに行ったけど、なんだかいつもと違ったよ。いろんなことがとつてもリラックスした感じだった。」

今までは脚をチクンとされて、血がそこらじゅうに飛び散ってた。今日は何もかもさっさとすんで、そんなことは起こらなかったよ。先生が新しい道具を使ったからだね。

僕にとつても、これからいつもこうだといいな！」

ラッキー、ボクサー犬（オス）

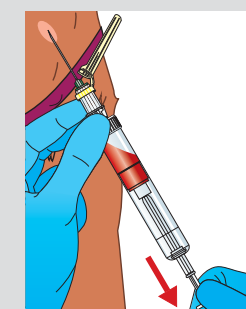

S-Monovette®採血システムなら、**2つ採血方法**が可能です。血流が多い場合は、S-Monovette®のデュアルシステムにより、従来どおりの真空技術による採血も可能です。

持続可能な採血システム

従来の真空採血管と比較して、S-Monovette®はより持続可能なシステムです。

S-Monovette®の大きなメリットは、血液を他のチューブに移すことなく、多くの血液検体を続けて採取できる点です。さまざまなタイプのS-Monovette®により、希望する検体採取が実現します。

廃棄コストやゴミの量は、スペースをとらない製品デザインやより持続可能なカートンを用いた梱包によって削減されます。

さらにS-Monovette®の製造には、従来の真空チューブと比較して、必要な材料が約1/3少なくて済みます。

動物やその飼い主にとって、動物クリニックへの通院が、ポジティブな体験となりますように



今すぐ無料でお試ください！



animalhealthcare.
sarstedt.com

S-Monovette®

片手で操作可能な
セーフティ針ガード

プリセットされたアダ
プタによる確実かつ安
定した接続

最初の血液1滴がS-Monovette®やホ
ース(Safety-Multifly®カニューレの
場合)に入ること、静脈穿刺がうまく
いったことを視認できます。

S-Monovette® は血液量1.2~4.5 ml用に、
さまざまなタイプで入手可能です。

吸引技術による患者に優しい検体採取。




付記：S-Monovette®は
Safety-Multifly®カニューレ
とともに使用可能です。

小型のペットでも 安心して採血



特にデリケートな動物での採血に

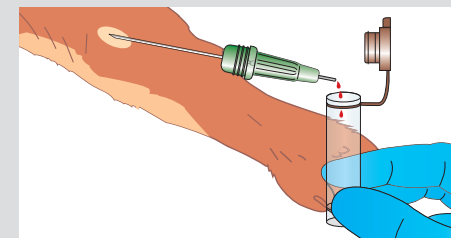

「こんにちは、皆さん！私はこの何日か具合がよくなって、ママが心配してたの。獣医さんはまず私の血をとって、原因を見つけようとした。獣医さんは私のために特別なカニューレを持ってて、それはほとんどチクリともしないの。私、何にも気がつかなかった。

ママもいつもより落ち着いてたわ。それはきっと、さっさと終わったから。ママは血を見るのがダメなのよ…」

ココ、チワワ (メス)



Multivette® 600は600 µlという少ない血液量向けに設計されています。採取はほぼ閉鎖状態で行われ、自然な状態の静脈圧を利用します。これにより、採取がとりわけ優しく簡単になります。


血液検体は直接Multivette® 600で遠心分離できます。これにより採血が容易になり、時間も節約できます。

内径が小さいため、遠心分離後のピペットによる取り出しがとりわけ容易です。加えて、検体を確実に密閉した状態でラボに発送することができます。

Multivette® 600

特殊構造の内部チューブは、静脈圧のみで採血されます

600 µl血液検体用のさまざまなタイプ

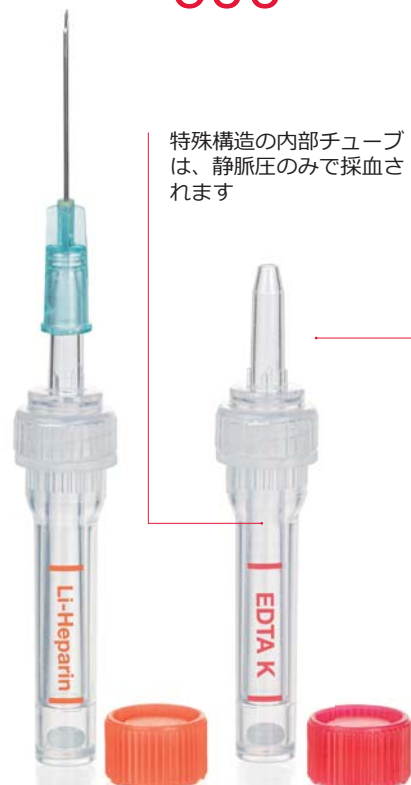

マイクロカニューレとマイクロ検体容器またはMicrovette®の併用

最適な流れ特性

連結パーツ内の残留がなく、血液の損失を回避

直接充填すれば、後から移し替えることによる血液の損失を防げます。

多様な容量とタイプによる柔軟性



今すぐ無料でお試しください！



animalhealthcare.sarstedt.com

「今日、私はまたしてもこの箱に押しこまれて、連れ去られたの。やっと外に出してもらえたら、私はまず撫で撫でされて。

それから、なんだか魔法みたいなことが起こったの。私の毛皮に何かが押しつけられ、それが白から赤に色が変わって、また私はなでなでされて、おうちに帰してもらえたの。ぜんぜん嫌な感じじゃなかったわ。」

ベラ、ベンガル猫



ザルスタット株式会社

〒101-0047

東京都千代田区内神田2-16-11 内神田渋谷ビル 8階

Tel: +81 3 3526 3530

Fax: +81 3 3526 0870

カスタマーサービス(ドイツ)

電話 +49 (0)800 0 83 305 0

info.jp@sarstedt.com

www.sarstedt.com



詳細情報と無料サンプルは下記まで：
animalhealthcare.sarstedt.com

ご不明な点がございましたら ご遠慮なくお申し付けください！

当社のウェブサイト www.sarstedt.com もご利用ください。