

Rendszerben pipettázni

Sarpette® M



Tökéletesen összehangolva

Kompatibilis és konform.
Robusztus és megbízható.
Mindent egy kézből.

Sarpette® M – Rendszerben pipettázni


SARSTEDT több mint 50 éve gyárt hajszálpontos pipettahegyeket. Ezzel a sok éves tapasztalattal, műszaki kompetenciával és a „Mindent egy kézből” mottóhoz híven az új Sarpette® M termékünkkel innovatív és a laboratóriumi mindennapok mai alkalmazásaihoz tökéletesen illeszkedő mikroliteres pipettát dobtuk piacra.

A fenntarthatóság és a környezetbarát kezelés a mai világban mindennél fontosabb. A robusztus és hosszú élettartamú Sarpette® M termékünk sok éven át társa lesz a laboratóriumi hétköznapokban.



Rugalmasan beállítható
hegyledobó

Hajszál pontos kúp

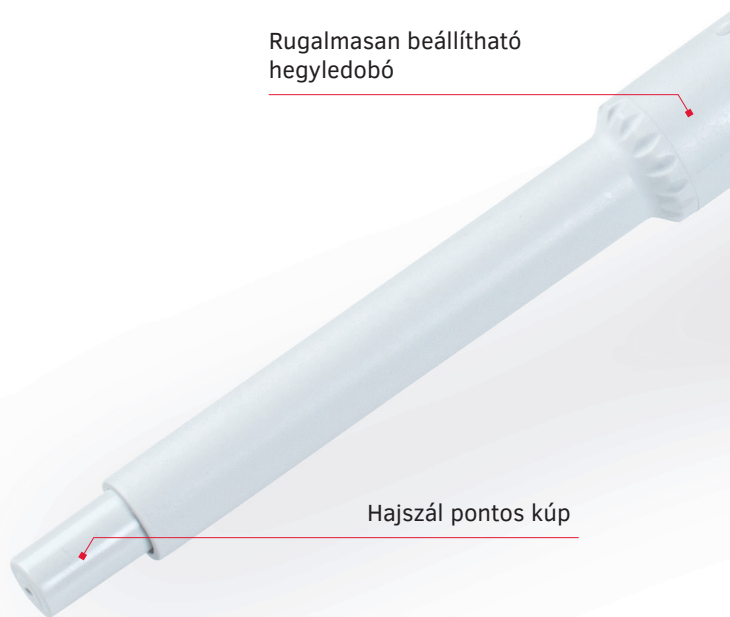

Sarpette® M

A legnagyobb pontosságú pipettázáshoz



Tesztelje ingyenesen
és kötelezettség nélkül!

sarpette.sarstedt.com

Ergonómikus

Könnyen járó és hiba nélkül működő pipettázófej.

Természetes és kényelmes kidobó helyzet.
Rugalmas és beállítható hegykidobó.

Kényelmesnek kell lennie – Különösen ergonómikus tervezés

Kiváló tulajdonságaikkal a SARSTEDT precíziós pipettái kitűnnek a napi használatban, kutatásban, diagnosztikában és minden laboratóriumban. Profitáljon a rendkívüli kényelemből, könnyedségből és hosszú élettartamból.





A hegyledobó egyedülálló elhelyezése

A közvetlenül a kéztámasz feletti elhelyezés különleges fiziológiai munkamódot tesz lehetővé. A nagyméretű hegyledobó gombbal és a könnyen járó pipettázó dugattyúval a Sarpette® M különösen ergonomikus pipettázást garantál. Ezenkívül a különösen csekély súlyának köszönhetően megelőzi az RSI-szindrómát (repetitive strain injury).

Ideális pipettázás

A rugalmasan beállítható hegyledobónak köszönhetően a hegyledobót csupán egy fordítással és csekély igénybe vétellel kényelmesen és egyénileg állíthatja be a pipettahegyének magasságához. A Sarpette® M ezért más gyártók sokféle hosszabb és rövidebb pipettahegyeivel is kompatibilis.



Megbízható

Gyors és pontos űrtartalom beállítás.
Pontos és precíz pipettázás.
Egyszerű és biztonságos kalibrálás.

Gyors és biztonságos – Az űrtartalom könnyed beállítása

A kívánt űrtartalomhoz egyszerűen fordítsa el a könnyen járó és pontos beállítási gombot. Az egyértelmű kattató megállítás és a szabadon elfordítható hüvelykujj-támaszték megakadályozzák a nem kívánt elállítódást.





Precíz és pontos

A pontos pipettázási eredmények a Sarpette® M esetén magától értetődőek. A SARSTEDT pipettahegyek és az Ön Sarpette® M termékei tökéletesen összehangolt duót képeznek minden felhasználási területre.



Villámgyors kalibrálás

A körülményes kalibrálás mostantól a múlté. A SARSTEDT Sarpette® M egyszerű kalibráló rendszerével most saját maga, gyorsan és biztonságosan tudja a Sarpette® M termékét kalibrálni. A precíz rendszer minden nemzetközi szabvánnyal konform.




Robusztus

Stabil és hosszú élettartamú kialakítás.
Autoklávban fertőtleníthető és UV-álló.
Praktikus és gyors tisztítás.

Nincsenek kompromisszumok az anyagválasztásban

Gördülékeny és egyszerű szétszerelés

Szerelje szét Sarpette® M termékét másodpercek alatt. Így a pipettát mindig ki tudja tisztítani és fertőtleníteni tudja. A kényelmes és gyors tisztítás a fertőzésmentes és biztonságos pipettázást még egyszerűbbé teszi.

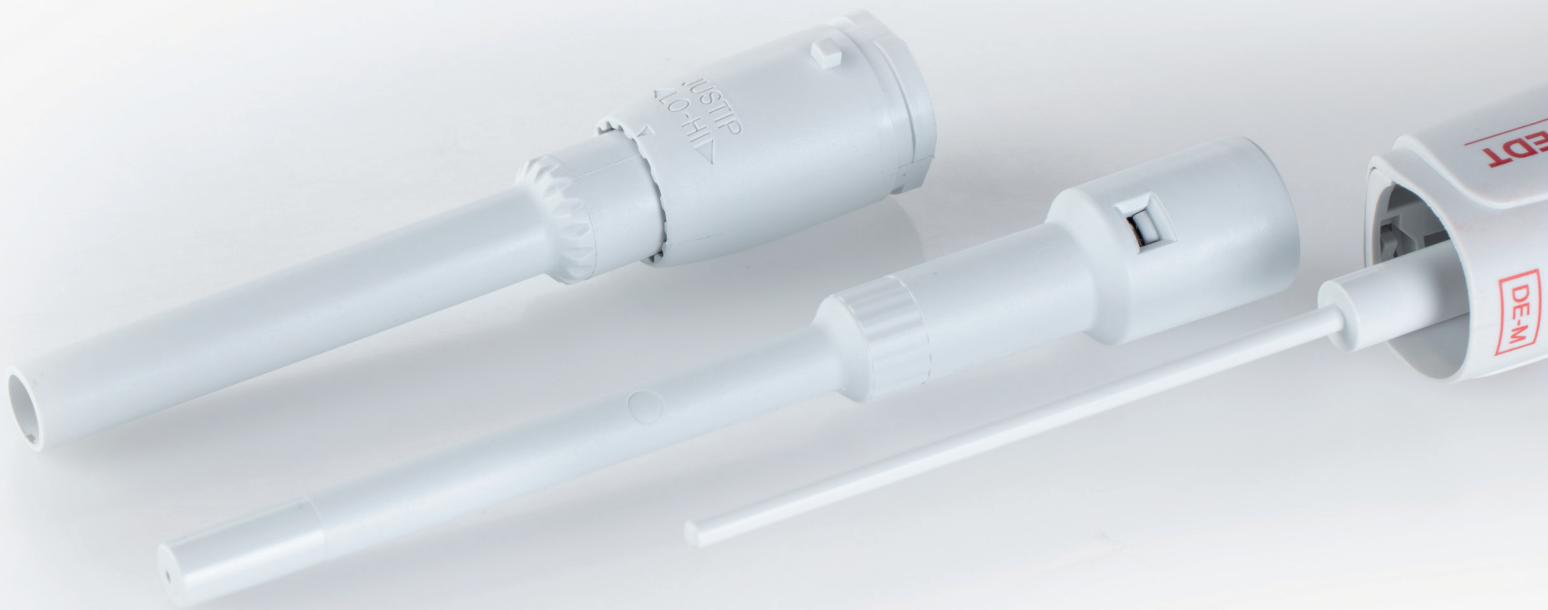



Teljesen fertőtleníthető autoklávban

A Sarpette® M terméket minden gond nélkül lehet 121°C-on autoklávban fertőtleníteni. Vegyszereknek extrém módon ellenálló és az UV-hatással szemben robusztus.



Stabil és hosszú élettartamú kialakítás

Az egymással összehangolt anyagok és a Sarpette® M kitűnő kidolgozása miatt 3 éves garanciaidőt tudunk biztosítani.



Rendelési Információk

A Sarpette® M teljesítményadatai

Cikkszám	Úrtartalom		Pontatlanság (E%)			Pontatlanság (CV%)		
	Térfogat tartomány	Osztás	Min. térf.	Közt. térf.	Max. térf.	Min. térf.	Közt. térf.	Max. térf.
90.3100.002	0,1 – 2 µl	0,002 µl	<+/- 6,0 % ¹	<+/- 4,0 %	<+/- 2,0 %	< 5,0 % ¹	< 3,3 %	< 1,5 %
90.3100.010	0,5 – 10 µl	0,01 µl	<+/- 2,5 % ²	<+/- 1,8 %	<+/- 1,0 %	< 1,8 % ²	< 1,2 %	< 0,5 %
90.3100.020	2 – 20 µl	0,02 µl	<+/- 2,5 %	<+/- 1,8 %	<+/- 1,0 %	< 1,7 %	< 1,0 %	< 0,5 %
90.3100.100	10 – 100 µl	0,1 µl	<+/- 1,5 %	<+/- 1,2 %	<+/- 0,8 %	< 1,0 %	< 0,6 %	< 0,2 %
90.3100.200	20 – 200 µl	0,2 µl	<+/- 1,5 %	<+/- 1,1 %	<+/- 0,6 %	< 0,6 %	< 0,4 %	< 0,2 %
90.3100.000	100 – 1.000 µl	1 µl	<+/- 1,5 %	<+/- 1,0 %	<+/- 0,5 %	< 0,5 %	< 0,4 %	< 0,2 %
90.3100.555	0,5 – 5 ml	0,01 µl	<+/- 1,5 %	<+/- 1,1 %	<+/- 0,6 %	< 0,6 %	< 0,5 %	< 0,3 %
90.3100.111	1 – 10 ml	0,01 µl	<+/- 1,5 %	<+/- 0,7 %	<+/- 0,5 %	< 0,5 %	< 0,3 %	< 0,2 %

A teljesítményértékeket desztillált vízzel, állandó hőmérsékleten ($\pm 0,5$ °C), az ISO 8655 szerinti 20 és 25 °C között kell meghatározni.

1) 0,5 µl-nél mérve 2) 1 µl-nél mérve

Sarpette® M8 / M12 teljesítményadatai

Cikkszám	Úrtartalom		Csa- tornák száma	Pontatlanság (E%)			Pontatlanság (CV%)		
	Térfogat tartomány	Osztás		Min. térf.	Közt. térf.	Max. térf.	Min. térf.	Közt. térf.	Max. térf.
90.3108.010	0,5 – 10 µl	0,01 µl	8	<+/- 3,5 % ¹	<+/- 2,5 %	<+/- 1,5 %	< 3,0 % ¹	< 2,0 %	< 1,0 %
90.3108.200	20 – 200 µl	0,2 µl	8	<+/- 0,9 % ¹	<+/- 0,8 %	<+/- 0,7 %	< 0,6 % ¹	< 0,5 %	< 0,3 %
90.3108.300	30 – 300 µl	0,4 µl	8	<+/- 1,0 % ¹	<+/- 0,9 %	<+/- 0,8 %	< 0,6 % ¹	< 0,5 %	< 0,3 %
90.3112.010	0,5 – 10 µl	0,01 µl	12	<+/- 3,5 % ¹	<+/- 2,5 %	<+/- 1,5 %	< 3,0 % ¹	< 2,0 %	< 1,0 %
90.3112.200	20 – 200 µl	0,2 µl	12	<+/- 0,9 % ¹	<+/- 0,8 %	<+/- 0,7 %	< 0,6 % ¹	< 0,5 %	< 0,3 %
90.3112.300	30 – 300 µl	0,4 µl	12	<+/- 1,0 % ¹	<+/- 0,9 %	<+/- 0,8 %	< 0,6 % ¹	< 0,5 %	< 0,3 %

A teljesítményértékeket desztillált vízzel, állandó hőmérsékleten ($\pm 0,5$ °C), az ISO 8655 szerinti 20 és 25 °C között kell meghatározni.

1) 10% névleges úrtartalomnál mérve



Bővebb információt
a pipettahegyek
kiválasztásához a:

www.refillrevolution.tips

Sarpette® M rendelési információk

Termékleírás	Térfogat tartomány [μl]	Rendelési sz.	Csomagolás	Megfelelő SARSTEDT pipettahegy
Sarpette® M egycsatornás	0,1 – 2 μl	90.3100.002	1 db/karton	70.3010.xxx 70.3020.xxx 70.3021.xxx
	0,5 – 10 μl	90.3100.010	1 db/karton	70.3010.xxx 70.3020.xxx 70.3021.xxx
	2 – 20 μl	90.3100.020	1 db/karton	70.3030.xxx 70.3031.xxx
	10 – 100 μl	90.3100.100	1 db/karton	70.3030.xxx 70.3031.xxx
	20 – 200 μl	90.3100.200	1 db/karton	70.3030.xxx 70.3031.xxx
	100 – 1.000 μl	90.3100.000	1 db/karton	70.3050.xxx 70.3060.xxx
	0,5 – 5 ml	90.3100.555	1 db/karton	70.1183.102 70.1183.002
Sarpette® M 8 csatornás	1 – 10 ml	90.3100.111	1 db/karton	70.1187.102 70.1187.002
	0,5 – 10 μl	90.3108.010	1 db/karton	70.3010.xxx 70.3020.xxx 70.3021.xxx
	20 – 200 μl	90.3108.200	1 db/karton	70.3030.xxx 70.3031.xxx
Sarpette® M 12 csatornás	30 – 300 μl	90.3108.300	1 db/karton	70.3030.xxx 70.3031.xxx 70.3040.xxx
	0,5 – 10 μl	90.3112.010	1 db/karton	70.3010.xxx 70.3020.xxx 70.3021.xxx
	20 – 200 μl	90.3112.200	1 db/karton	70.3030.xxx 70.3031.xxx
	30 – 300 μl	90.3112.300	1 db/karton	70.3030.xxx 70.3031.xxx 70.3040.xxx

Rendelési információk a Sarpette® M-hez való pipettaállványokhoz

Termékleírás	Rendelési sz.	Csomagolás
Pipetta állvány, elfordítható, 6 SARSTEDT Sarpette® M egycsatornás pipettákhoz 1.000 μl-ig	95.1760.200	1 db / belső karton 4 db / karton
Pipetta állvány, 3 SARSTEDT Sarpette® M egy- és többcsatornás pipettákhoz	95.1760.201	1 db / belső karton 4 db / karton

SARSTEDT Kft

Ezred u. 2
Login Business Park
B2-01-06
1044 Budapest

Tel: +36 1 38 31 216
Fax: +36 1 38 31 213

info.hu@sarstedt.com
www.sarstedt.com