

Sistemli pipetleme

Sarpette® M




Mükemmel ayarlı

Uyumlu ve uygun
Dayanıklı ve emniyetli
Her şey tek elden

Sarpette® M – Sistemli pipetleme


SARSTEDT, 50 yıldan uzun süredir tam ayarlı pipet uçları üretmektedir. Bu yılların tecrübesiyle, teknik yeterlilikle ve „her şey tek elden“ mottosuna bağlılıkla yeni Sarpette® M ile yenilikçi ve laboratuvar rutinindeki güncel uygulamalara göre harika ayarlanmış mikrolitre pipetleri piyasaya sunduk.

Sürdürülebilirlik ve çevre dostu faaliyet günümüzde giderek daha büyük önem kazanmaktadır. Sarpette® M dayanıklı ve uzun ömürlü olma özelliğiyle uzun yıllar laboratuvar rutininizde size eşlik eder.

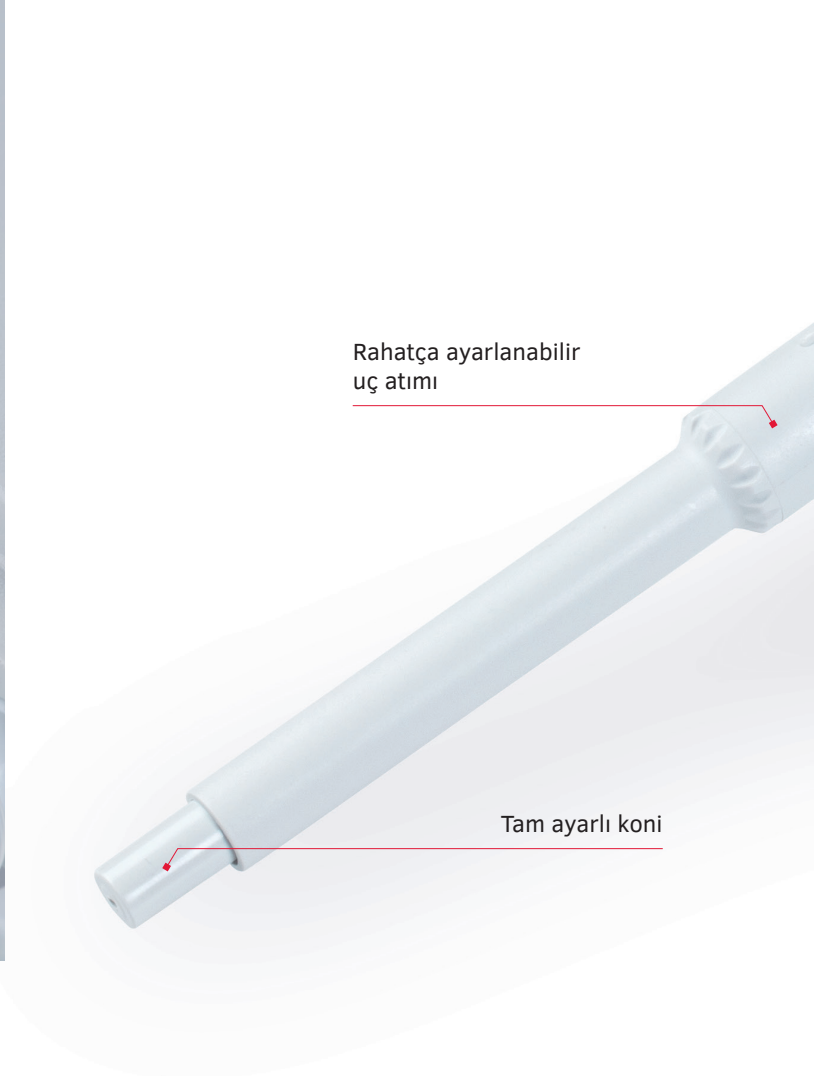

Sarpette® M

Yüksek hassasiyetli pipetleme için

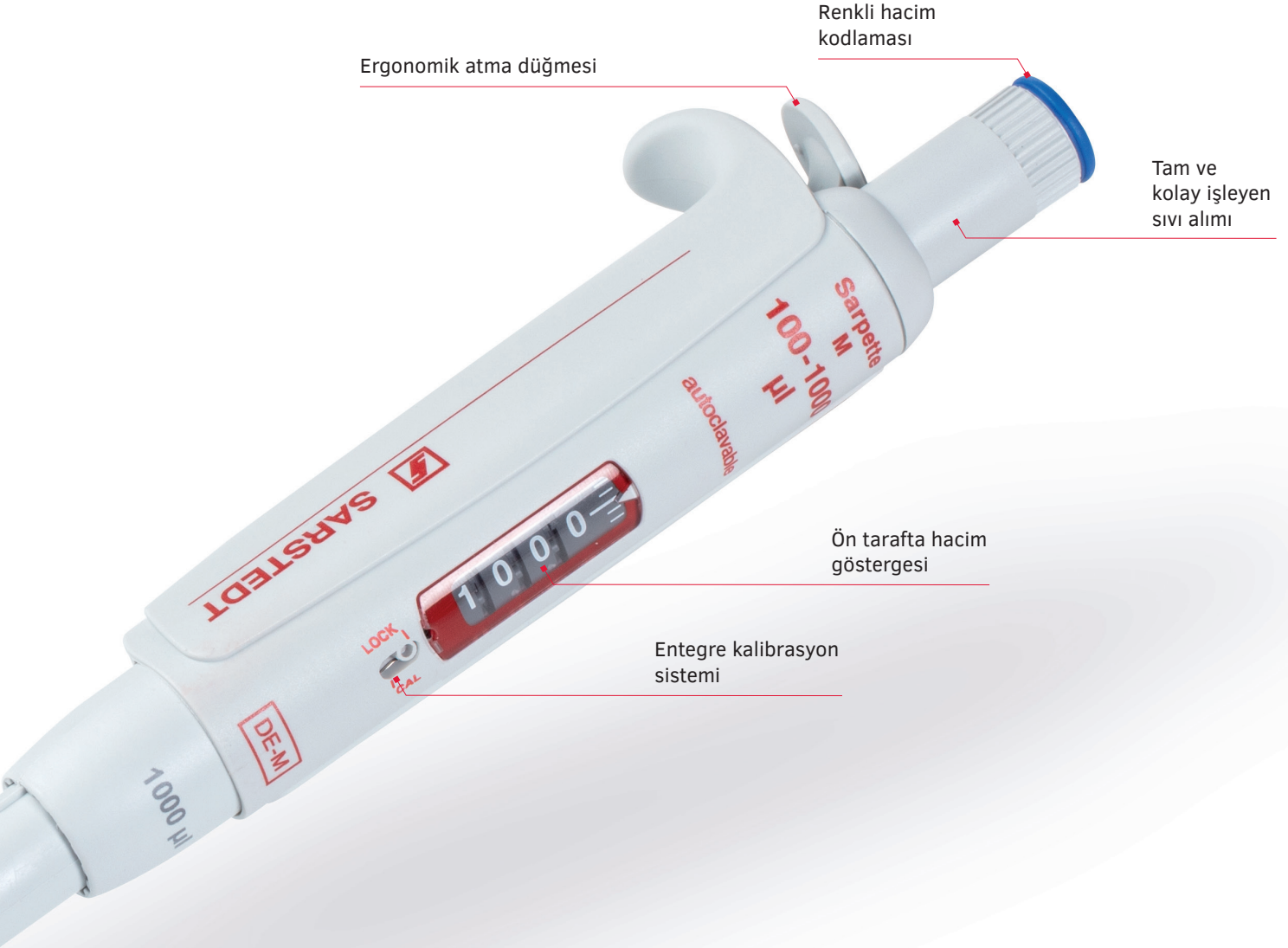

Ücretsiz ve bağlayıcı
olmadan test edin!

sarpette.sarstedt.com

Ergonomik

Kolay işleyen ve sessiz hareketli pipetleme düğmesi
Doğal ve rahat atma pozisyonu
Rahat ve ayarlanabilir uç atma

Konfor olmalı – Özel ergonomik tasarım

SARSTEDT hassasiyet pipetleri günlük kullanımda, araştırmada, tanısal işlemlerde ve her laboratuvarında harika özellikleriyle öne çıkmaktadır. Alışılmışın dışında konfordan, kolaylıktan ve uzun ömürlülüğten yararlanın.





Atıcının eşsiz yerleşmesi

Doğrudan el ile besleme aracılığıyla yerleştirme, özel bir fizyolojik çalışma şekli sağlar. Sarpette® M, geniş yüzeyli atım düğmesi ve kolay işleyen pipetleme pistonu ile özel ergonomik pipetlemeyi garanti eder. Düşük ağırlığıyla birlikte RSI (repetitive strain injury - tekrar eden eklem incinmesi) sendromu önlenir.

İdeal pipetleme

Rahat ayarlanabilen uç atma ile atıcıyı yalnızca tek döndürmeyle ve fazla zahmet etmeden pipet ucunuzun yüksekliğine konforlu ve bireysel olarak ayarlayabilirsiniz. Böylece Sarpette® M, diğer üreticilerin birçok uzun ve kısa pipet uçlarıyla da uyumludur.



Emniyetli

Hızlı ve tam hacim ayarı
Uygun ve hassas pipetleme
Kolay ve güvenli kalibrasyon

Hızlı ve güvenli – Kolay işleyen hacim ayarı

İstediğiniz hacmi ayarlamak için sadece kolay işleyen ve hassas ayar düğmesini döndürün. Belirgin tıklama noktaları ve rahat döndürülebilir başparmak desteği istenmeyen ayar değişikliklerini önler.





Hassas ve uygun

Sarpette® M ile doğal olarak tam pipetleme sonuçları elde edilir. SARSTEDT pipet uçları ve Sarpette® M'niz tüm kullanım alanları için harika ayarlanmış bir ikilidir.



Çabucak kalibre edilir

Zahmetli kalibrasyonlar artık tarih oluyor. SARSTEDT Sarpette® M'nin kolay kalibrasyon sistemi sayesinde Sarpette® M'nizi kendi kendinize, hızlı ve güvenli şekilde kalibre edebilirsiniz. Hassas sistem tüm uluslararası standartlara uygundur.



Dayanıklı

Sağlam ve uzun ömürlü yapı
Otoklavlanabilir ve ultraviyole ışına dayanıklı
Pratik ve hızlı temizlik

Materyal seçiminde ödün yok

Çabuk ve kolay sökülebilir

Sarpette® M'nizi saniyeler içinde sökün.
Böylece pipetleri her an temizleyebilir ve dezenfekte edebilirsiniz. Rahat ve hızlı temizlik, bulaşmadan ve güvenli şekilde pipetlemeyi daha da kolay hale getirir.





Tamamen otoklavlanabilir

Sarpette® M, 121°C'de sorunsuzca otoklavlanabilir. Kimyasallara ve UV etkisine karşı oldukça dayanıklıdır.



Sağlam ve ömürlü yapı

Üst üste ayarlanmış materyaller ve Sarpette® M'nin mükemmel işleyişi ile 3 yıl garanti süresi sağlayabiliriz.



Sipariş Bilgileri

Sarpette® M'nin performans verileri

Ürün numarası	Hacmi		Hata payı (%E)			Belirsizlik (%CV)		
	Hacim alanı	Ayırma	Min. hacim	Ara hacim	Maks. hacim	Min. hacim	Ara hacim	Maks. hacim
90.3100.002	0,1 – 2 µl	0,002 µl	<+/- 6,0 % ¹	<+/- 4,0 %	<+/- 2,0 %	< 5,0 % ¹	< 3,3 %	< 1,5 %
90.3100.010	0,5 – 10 µl	0,01 µl	<+/- 2,5 % ²	<+/- 1,8 %	<+/- 1,0 %	< 1,8 % ²	< 1,2 %	< 0,5 %
90.3100.020	2 – 20 µl	0,02 µl	<+/- 2,5 %	<+/- 1,8 %	<+/- 1,0 %	< 1,7 %	< 1,0 %	< 0,5 %
90.3100.100	10 – 100 µl	0,1 µl	<+/- 1,5 %	<+/- 1,2 %	<+/- 0,8 %	< 1,0 %	< 0,6 %	< 0,2 %
90.3100.200	20 – 200 µl	0,2 µl	<+/- 1,5 %	<+/- 1,1 %	<+/- 0,6 %	< 0,6 %	< 0,4 %	< 0,2 %
90.3100.000	100 – 1.000 µl	1 µl	<+/- 1,5 %	<+/- 1,0 %	<+/- 0,5 %	< 0,5 %	< 0,4 %	< 0,2 %
90.3100.555	0,5 – 5 ml	0,01 µl	<+/- 1,5 %	<+/- 1,1 %	<+/- 0,6 %	< 0,6 %	< 0,5 %	< 0,3 %
90.3100.111	1 – 10 ml	0,01 µl	<+/- 1,5 %	<+/- 0,7 %	<+/- 0,5 %	< 0,5 %	< 0,3 %	< 0,2 %

Performans değerleri ISO 8655 uyarınca 20 ile 25 °C arasında sabit sıcaklıkta ($\pm 0,5$ °C) saf suyla tespit edilmiştir.

1) 0,5 µl'de ölçüldü 2) 1 µl'de ölçüldü

Sarpette® M8/M12'nin performans verileri

Ürün numarası	Hacmi			Hata payı (%E)			Belirsizlik (%CV)		
	Hacim alanı	Ayırma	Kanal sayısı	Min. hacim	Ara hacim	Maks. hacim	Min. hacim	Ara hacim	Maks. hacim
90.3108.010	0,5 – 10 µl	0,01 µl	8	<+/- 3,5 % ¹	<+/- 2,5 %	<+/- 1,5 %	< 3,0 % ¹	< 2,0 %	< 1,0 %
90.3108.200	20 – 200 µl	0,2 µl	8	<+/- 0,9 % ¹	<+/- 0,8 %	<+/- 0,7 %	< 0,6 % ¹	< 0,5 %	< 0,3 %
90.3108.300	30 – 300 µl	0,4 µl	8	<+/- 1,0 % ¹	<+/- 0,9 %	<+/- 0,8 %	< 0,6 % ¹	< 0,5 %	< 0,3 %
90.3112.010	0,5 – 10 µl	0,01 µl	12	<+/- 3,5 % ¹	<+/- 2,5 %	<+/- 1,5 %	< 3,0 % ¹	< 2,0 %	< 1,0 %
90.3112.200	20 – 200 µl	0,2 µl	12	<+/- 0,9 % ¹	<+/- 0,8 %	<+/- 0,7 %	< 0,6 % ¹	< 0,5 %	< 0,3 %
90.3112.300	30 – 300 µl	0,4 µl	12	<+/- 1,0 % ¹	<+/- 0,9 %	<+/- 0,8 %	< 0,6 % ¹	< 0,5 %	< 0,3 %

Performans değerleri ISO 8655 uyarınca 20 ile 25 °C arasında sabit sıcaklıkta ($\pm 0,5$ °C) saf suyla tespit edilmiştir.

1) %10 nominal hacimde ölçüldü



Pipet uçlarının seçimi hakkında açıklayıcı bilgileri internet adresinde bulabilirsiniz

www.refillrevolution.tips

Sarpette® M sipariş bilgileri

Açıklama	Hacim alanı [μ l]	Sipariş No.	Ambalajlama	Uygun SARSTEDT pipet ucu
Sarpette® M tek kanal	0,1 – 2 μ l	90.3100.002	1 adet/karton	70.3010.xxx 70.3020.xxx 70.3021.xxx
	0,5 – 10 μ l	90.3100.010	1 adet/karton	70.3010.xxx 70.3020.xxx 70.3021.xxx
	2 – 20 μ l	90.3100.020	1 adet/karton	70.3030.xxx 70.3031.xxx
	10 – 100 μ l	90.3100.100	1 adet/karton	70.3030.xxx 70.3031.xxx
	20 – 200 μ l	90.3100.200	1 adet/karton	70.3030.xxx 70.3031.xxx
	100 – 1.000 μ l	90.3100.000	1 adet/karton	70.3050.xxx 70.3060.xxx
	0,5 – 5 ml	90.3100.555	1 adet/karton	70.1183.102 70.1183.002
1 – 10 ml	90.3100.111	1 adet/karton	70.1187.102 70.1187.002	
Sarpette® M 8 kanal	0,5 – 10 μ l	90.3108.010	1 adet/karton	70.3010.xxx 70.3020.xxx 70.3021.xxx
	20 – 200 μ l	90.3108.200	1 adet/karton	70.3030.xxx 70.3031.xxx
	30 – 300 μ l	90.3108.300	1 adet/karton	70.3030.xxx 70.3031.xxx 70.3040.xxx
Sarpette® M 12 kanal	0,5 – 10 μ l	90.3112.010	1 adet/karton	70.3010.xxx 70.3020.xxx 70.3021.xxx
	20 – 200 μ l	90.3112.200	1 adet/karton	70.3030.xxx 70.3031.xxx
	30 – 300 μ l	90.3112.300	1 adet/karton	70.3030.xxx 70.3031.xxx 70.3040.xxx

Sarpette® M'ye yönelik pipet ayaklığı sipariş bilgileri

Açıklama	Sipariş No.	Ambalajlama
Pipet ayaklığı, döndürülebilir, 6 SARSTEDT Sarpette® M tek kanallı pipetler (1.000 μ l'a kadar) için	95.1760.200	1 ad./iç karton 4 ad./karton
Pipet ayaklığı, 3 SARSTEDT Sarpette® M tek ve çok kanallı pipetler için	95.1760.201	1 ad./iç karton 4 ad./karton

Sorularınızın olması durumunda:
Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız!

Web sitemizi de ziyaret edin:
www.sarstedt.com

SARSTEDT International GmbH

Merkezi Almanya İstanbul Merkez Şubesi
Acıbadem Mahallesi,
Akasya Acıbadem Sitesi Kent Kule A
Giriş Kat:27 Da:158
Üsküdar – İstanbul

Tel: +90 216 290 18 65
Fax: +90 216 290 18 64

info.tr@sarstedt.com
www.sarstedt.com