

NFT- urineopvangsysteem

Monstername met hygiënisch
gesloten en naaldvrije overdracht



NFT Needle Free Transfer

Het eerste urineopvangsysteem van SARSTEDT voor hygiënisch gesloten en naaldvrije overdracht

Preamalyse
van urine
2.0

Hygiënisch. Praktisch. Veilig

Hoe kan het verzamelen van urinemonsters nog veiliger, hygiënischer en gemakkelijker worden gemaakt? Het antwoord op deze vraag wordt gegeven door de innovatieve producten van het NFT-systeem. Als eerste gesloten en naaldvrij urineoverdrachtsysteem van SARSTEDT combineert de nieuwe productfamilie de voordelen van bestaande producten in één oplossing.


Nieuwe standaarden voor de preanalyse van urine

- Verkrijgbaar als NFT-urinebeker en ook als 3-liter NFT-urineverzamel fles voor 24 uren urineverzameling
- Metaal- en naaldvrij transfersysteem
- Veilig bewaren en transporteren
- Eenvoudige en hygiënische urinetransfer met de Urinemonovette®
- Geen naaldbestendige afvalcontainer nodig voor het afvoeren van NFT-producten



Gewoon praktisch


De Urinemonovette® maakt hygiënisch urinetransfer mogelijk maar is ook geschikt als analysebeker voor teststrips en analysers en als centrifugebuisje voor het verzamelen van sediment

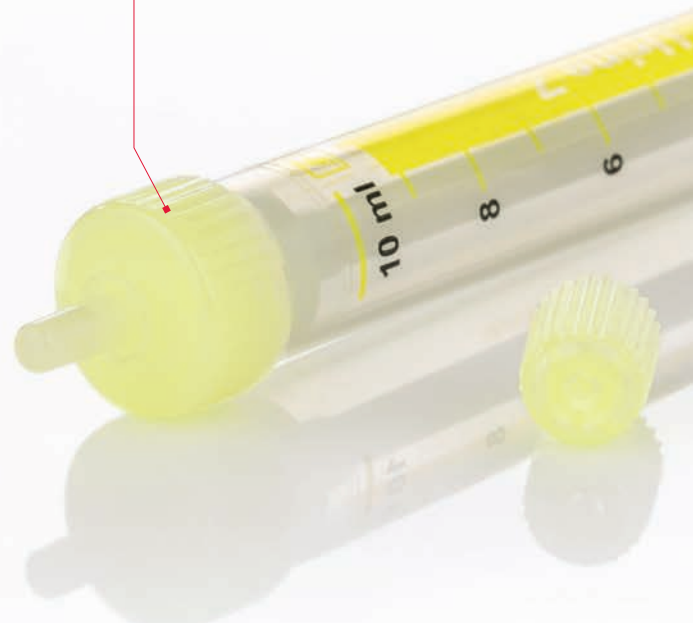

Nieuw

Met de nieuwe naaldvrije opvangfunctie is een naald niet langer nodig. De Urine-monovette® dringt gemakkelijk door het nieuwe NFT-membraan.

Na de gemakkelijke afname wordt de toegang ook na meerdere afnames onmiddellijk weer goed en hygiënisch gesloten. Er is geen risico op infectie door prikletsel.

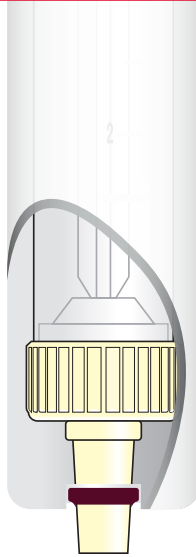

OVERTUIGEND

- > **Minimaal risico van verwondingen en een veiligere toepassing voor personeel en patiënten dankzij naaldvrije monstername**
- > **Besparingen op afvalverwijdering, omdat de onderdelen van het NFT-systeem niet apart op een prikvrige manier hoeven te worden weggegooid**



Vloeistof- en reukdicht
schroefdeksel met transfereenheid

Afgesloten
Veiligheidsetiket geeft de interne steriliteit van de NFT-urinebeker aan wanneer het intact is

Een helder zicht
Hoogtransparante beker van robuust polypropyleen (PP) voor een goede visuele beoordeling

Innovatief
Naaldvrije transfereenheid met doordringbaar NFT-membraan

NFT -urineopvangsysteem

Het beste van verschillende systemen

Het NFT-systeem met Urinemonovette®, NFT-urinebeker en NFT-urineverzamelfles garandeert hygiënische werkomstandigheden tijdens het hele monsternamesproces:

- Met de Urinemonovette® en de bijgeleverde zuigtip kunt u de afnameprocedure zonder naald uitvoeren, zelfs bij zeer kleine volumes. Een aparte transfereenheid zoals bij vacuümsystemen is niet nodig.
- De intuïtieve bediening kan snel en zonder veel training worden aangeleerd.
- Met de Urinemonovette® kan de afname indien nodig worden herhaald door het opzuigprincipe – er is geen risico van functieverlies door verkeerd gebruik.
- Dankzij de geavanceerde, naaldvrije afnamefunctie wordt het risico van letsel bij personeel en patiënten geminimaliseerd.
- Na gebruik hoeven de producten van het NFT-systeem niet apart te worden afgevoerd op een prikvrige manier – dit bespaart tijd en geld in vergelijking tot producten met een geïntegreerde naald.

Doordacht

De NFT-urineverzamelfles met een volume van 3.000 ml, ergonomische handgreep, grote openingsdiameter en transparant kijkvenster met schaalverdeling in stappen van 100 ml



Urinemonovette® – hygiënisch werken

- De Urinemonovette® maakt hygiënische, naaldvrije transfer uit urineopvangbekers of urineafvoersystemen mogelijk.
- De urine kan direct in de gevulde Urinemonovette® worden geanalyseerd met in de handel verkrijgbare teststrips.
- De Urinemonovette® is geschikt voor transport en verzending volgens verpakkingsvoorschrift P650 van ADR en IATA. Ze kan worden gebruikt voor het verzamelen van sediment in de



Gebruiksvriendelijk: Urinepotje NFT



Comfortabel bij 24-uurs urineopvang: Urineverzamel fles NFT



Zelfs met de NFT-urineverzamel fles met groot volume blijft het verzamelen van monsters een schoon proces dankzij de gesloten transferfunctie.



Bekijk de handleiding
over het eenvoudige
gebruik van
NFT-producten:
sarstedt.com/nft-tu

BESTEL GRATIS EEN TEST-SET



sarstedt.com/nft-sa



SARSTEDT stelt nieuwe normen met het NFT-urineopvangsysteem


Alleen schone en correcte monsternamen garandeert correcte analyseresultaten. De producten van het NFT-systeem van SARSTEDT stellen normen voor de routinematige en zorgvuldige preanalyse in combinatie met maximale veiligheid voor gebruikers en patiënten.



NFT-producten hoeven niet apart prikveilig te worden weggegooid.

Preanalytical Workflow made by SARSTEDT

Maak gebruik van de synergie van onze op elkaar afgestemde systemen.

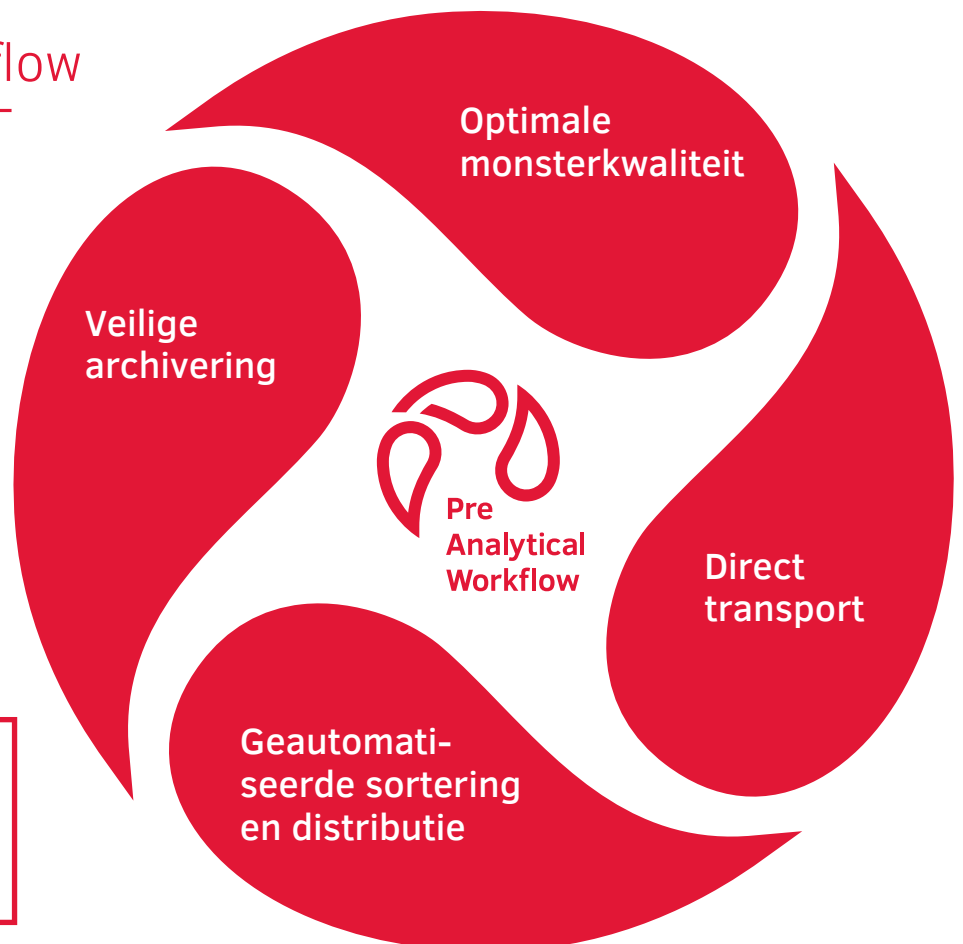

Ontdek de 360°-oplossingen voor uw preanalyse van SARSTEDT
sarstedt.com/nft-wf-nl

NFT-urinebeker 100 ml

Bestelnr.	Volume	L x Ø	Uitvoering	Zuiverheid	Verpakking (binnen/buiten)
75.562.900	100 ml	72 x 62 mm	Met veiligheidsetiket en transfereenheid	Steriel	5 / 200

NFT-urineverzamel fles 3,0 l

Bestelnr.	Volume	L x b x h	Uitvoering	Zuiverheid	Verpakking (binnen/buiten)
77.575.900	3000 ml	125 x 130 x 246 mm	Met transfereenheid en patiëntenetiket, openingsdiameter 80 mm	-	30 / 30

Urinemonovette® Z

zonder preparaat

Bestelnr.	Volume	L x Ø	Uitvoering (geel)	Zuiverheid	Verpakking (binnen/buiten)
10.250.001	3,2 ml	75 x 13 mm	Papieren etiket, beschrijfbaar	-	64 / 512
10.258	8,5 ml	92 x 15 mm	Kunststof etiket, transparant	-	64 / 512
10.258.001	8,5 ml	92 x 15 mm	Papieren etiket, beschrijfbaar	-	64 / 512
10.258.020	8,5 ml	92 x 15 mm	Kunststof etiket, transparant, per stuk in blisterverpakking	Steriel	100 / 500
10.252	10 ml	102 x 15 mm	Kunststof etiket, transparant	-	64 / 512
10.252.001	10 ml	102 x 15 mm	Papieren etiket, beschrijfbaar	-	64 / 512
10.252.020	10 ml	102 x 15 mm	Kunststof etiket, transparant, per stuk in blisterverpakking	Steriel	100 / 500
10.252.030	10 ml	102 x 15 mm	Kunststof etiket, transparant, met lichtbescherming	-	64 / 512

Urinemonovette® boorzuur

met stabilisator voor microbiologische onderzoeken

Bestelnr.	Volume	L x Ø	Uitvoering (groen)	Zuiverheid	Verpakking (binnen/buiten)
10.256.001	3,2 ml	75 x 13 mm	Papieren etiket, beschrijfbaar	-	64 / 512
10.256.021	3,2 ml	75 x 13 mm	Papieren etiket, beschrijfbaar, per stuk in blisterverpakking	Steriel	100 / 500
10.260.001*	8,5 ml	92 x 15 mm	Papieren etiket, beschrijfbaar	-	64 / 512
10.260.021*	8,5 ml	92 x 15 mm	Papieren etiket, beschrijfbaar, per stuk in blisterverpakking	Steriel	100 / 500
10.253	10 ml	102 x 15 mm	Kunststof etiket, transparant	-	64 / 512
10.253.001	10 ml	102 x 15 mm	Papieren etiket, beschrijfbaar	-	64 / 512
10.253.020	10 ml	102 x 15 mm	Kunststof etiket, transparant, per stuk in blisterverpakking	Steriel	100 / 500
10.253.021	10 ml	102 x 15 mm	Papieren etiket, beschrijfbaar, per stuk in blisterverpakking	Steriel	100 / 500

Meer verbruiksartikelen voor preanalyse van urine vindt u op www.sarstedt.com.

*Geplande nieuwe introductie 2e kwartaal 2024

Als u vragen hebt:
We helpen u graag!

Bezoek ook onze website: www.sarstedt.com

SARSTEDT B.V.

Rithmeesterpark 23 A
4838 GZ Breda

Tel.: +31 76 501 75 50

Fax: +31 76 501 76 26

info.nl@sarstedt.com

SARSTEDT B.V.

Uitbreidingsstraat 84/3
2600 Berchem

Tel.: +32 3 541 76 92

Fax +32 3 541 81 03

info.be@sarstedt.com

www.sarstedt.com



Meer informatie,
video's en monsters bestellen:
sarstedt.com/nft