

NFT

Sistema de toma de muestras de orinas

Recogida de muestras cerrada, higiénica y sin aguja



NFT Needle Free Transfer

El primer sistema de transferencia de orina SARSTEDT para la recogida de muestras cerrada, higiénica y sin agujas

Preanalítica
de orinas
2.0

Higiénico. Práctico. Seguro.


¿Cómo se pueden realizar la toma de muestra de orina para que sea aún más segura, higiénica y fácil? Los innovadores productos del sistema NFT brindan la respuesta a esta pregunta. Como el primer sistema de extracción de orina cerrado y sin agujas de SARSTEDT, la nueva familia de productos combina las ventajas de los productos existentes en una única solución.

Nuevos estándares para la preanalítica de orinas

- Disponible como vaso de orina NFT y contenedor de 3 litros NFT para la recogida de orina de 24 horas
- Sistema de extracción sin agujas
- Almacenamiento y transporte seguros
- Transferencia de orina fácil e higiénica con la Monovette® de orina
- No se requiere un contenedor resistente a perforaciones para desechar los productos NFT

Simplemente práctico

La Monovette® de orina permite la obtención higiénica de la orina y también es adecuada como recipiente de análisis para tiras reactivas, analizadores y como tubo de centrifuga para la recolección de sedimentos

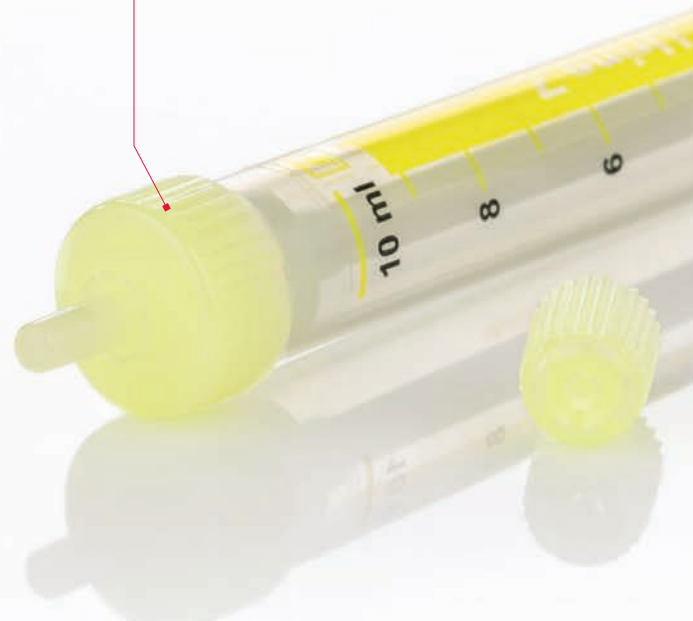


Novedad

Con la nueva función de extracción, ya no se necesita una aguja. La Monovette® de orina penetra fácilmente en la novedosa membrana NFT.

Tras una cómoda extracción, el acceso se vuelve a cerrar inmediatamente de forma hermética e higiénica, incluso después de varias extracciones.

No hay riesgo de infección debido a una lesión por pinchazo de aguja.

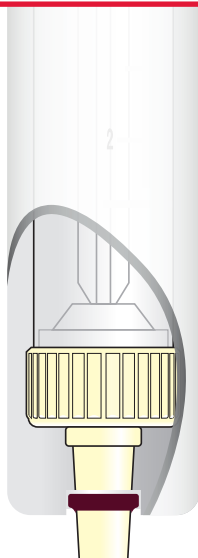

CONVINCENTE

- **Riesgo minimizado de lesiones y más seguridad de la aplicación** para el personal y el paciente gracias a la recogida de muestras sin agujas
- **Ahorro en la eliminación**, ya que los componentes del sistema NFT no tienen que eliminarse por separado



Estanco y libre de olores
Tapón de rosca con unidad de transferencia

Sellado
La etiqueta de seguridad indica la esterilidad interna del vaso de orina NFT cuando está intacto

Transparencia
Recipiente altamente transparente fabricado en robusto polipropileno (PP) para una buena evaluación visual

Innovador
Unidad de transferencia sin aguja con membrana NFT perforable

NFT

Sistema de extracción de orina

La mejor combinación de diferentes sistemas

El sistema NFT con Monovette® de orina, vaso de orina y contenedor de recogida de orina garantiza unas condiciones de trabajo higiénicas durante todo el proceso de recogida de muestras:

- Con la Monovette® de orina y la punta cánula de aspiración, puede llevar a cabo el proceso de recogida sin agujas, incluso con una cantidad de llenado muy pequeña. No se requiere una unidad de transferencia separada como en los sistemas de vacío.
- El manejo es intuitivo y puede aprender rápidamente y sin mucho esfuerzo de formación.
- Con la Monovette® de orina, el proceso de extracción se puede repetir, si fuera necesario, gracias al principio de aspiración; no existe el riesgo de pérdida de función por una aplicación incorrecta.
- Gracias a la sofisticada función de extracción sin aguja, se minimiza el riesgo de lesiones para el personal y los pacientes.
- Después de la extracción, los productos del sistema NFT no tienen que desecharse por separado; esto ahorra tiempo y dinero en comparación con los productos con una aguja integrada.

Sofisticado

El contenedor de recogida de orina NFT con un volumen de 3.000 ml, asa ergonómica, gran diámetro de apertura y mirilla transparente graduada en intervalos de 100 ml



Monovette® de orina – trabajo higiénico con poca manipulación

- La Monovette® de orina permite la recogida de muestras higiénica y sin agujas en los recipientes de recogida o en los sistemas de drenaje de orina.
- Se puede realizar un análisis directamente en la Monovette® de orina con tiras reactivas disponibles en el mercado.
- La Monovette® de orina es adecuada para el transporte y el envío de acuerdo con las regulaciones de embalaje P650 de ADR e IATA. Se puede utilizar en la centrífuga para extracción de sedimentos y en analizadores.



Manipulación sencilla: Vaso de orina NFT



Cómodo para la recogida de orina 24 horas: contenedor de recogida de orina NFT



Incluso con el contenedor de recogida de orina NFT de gran volumen, la toma de muestras sigue siendo higiénica gracias a la función de recogida cerrada.



Consulte el tutorial sobre cómo manejar fácilmente los productos NFT: sarstedt.com/nft-tu-es

SOLICITE UNA MUESTRA DE PRODUCTO GRATUITA



sarstedt.com/nft-sa-es



Con el sistema de extracción de orina NFT, SARSTEDT establece nuevos estándares

Solo una recogida limpia y correcta de las muestras garantiza unos resultados analíticos correctos. Los productos del sistema NFT de SARSTEDT establecen estándares para los preanálisis rutinarios y minuciosos en relación con la máxima seguridad para usuarios y pacientes.



necesitan desecharse en - contenedores de eliminación punzocortantes.

Flujo de trabajo preanalítico diseñado por SARSTEDT

Aproveche la sinergia de nuestros sistemas coordinados.



Descubra las soluciones 360° para su preanalítica con SARSTEDT
sarstedt.com/nft-wf-es

Vaso de orina NFT 100 ml

| Referencia | Volumen | L x Ø | Versión | Pureza | Presentación (caja interna/caja externa) |
|------------|---------|------------|---|--------------|---|
| 75.562.900 | 100 ml | 72 x 62 mm | con etiqueta de seguridad y unidad de transferencia | esterilizado | 5 / 200 |

Contenedor de recogida de orina NFT 3,0 l

| Referencia | Volumen | L x A x H | Versión | Pureza | Presentación (caja interna/caja externa) |
|------------|---------|--------------------|---|--------|---|
| 77.575.900 | 3000 ml | 125 x 130 x 246 mm | con unidad de transferencia y etiqueta del paciente, diámetro de apertura 80 mm | - | 30 / 30 |

Monovette® Z de orina

sin preparación

| Referencia | Volumen | L x Ø | Versión (amarillo) | Pureza | Presentación (caja interna/caja externa) |
|------------|---------|-------------|--|--------------|---|
| 10.250.001 | 3,2 ml | 75 x 13 mm | Etiqueta de papel para escritura | - | 64 / 512 |
| 10.258 | 8,5 ml | 92 x 15 mm | Etiqueta de papel para escritura | - | 64 / 512 |
| 10.258.001 | 8,5 ml | 92 x 15 mm | Etiqueta de papel para escritura | - | 64 / 512 |
| 10.258.020 | 8,5 ml | 92 x 15 mm | Etiqueta de plástico, transparente, envase individual en blíster | esterilizado | 100 / 500 |
| 10.252 | 10 ml | 102 x 15 mm | Etiqueta de plástico, transparente | - | 64 / 512 |
| 10.252.001 | 10 ml | 102 x 15 mm | Etiqueta de papel para escritura | - | 64 / 512 |
| 10.252.020 | 10 ml | 102 x 15 mm | Etiqueta de plástico, transparente, envase individual en blíster | esterilizado | 100 / 500 |
| 10.252.030 | 10 ml | 102 x 15 mm | Etiqueta de plástico, transparente, con protección contra la luz | - | 64 / 512 |

Monovette® de orina con ácido bórico

con estabilizador para estudios microbiológicos

| Referencia | Volumen | L x Ø | Versión (verde) | Pureza | Presentación (caja interna/caja externa) |
|-------------|---------|-------------|--|--------------|---|
| 10.256.001 | 3,2 ml | 75 x 13 mm | Etiqueta de papel para escritura | - | 64 / 512 |
| 10.256.021 | 3,2 ml | 75 x 13 mm | Etiqueta de papel para escritura, envase individual en blíster | esterilizado | 100 / 500 |
| 10.260.001* | 8,5 ml | 92 x 15 mm | Etiqueta de papel para escritura | - | 64 / 512 |
| 10.260.021* | 8,5 ml | 92 x 15 mm | Etiqueta de papel para escritura, envase individual en blíster | esterilizado | 100 / 500 |
| 10.253 | 10 ml | 102 x 15 mm | Etiqueta de plástico, transparente | - | 64 / 512 |
| 10.253.001 | 10 ml | 102 x 15 mm | Etiqueta de papel para escritura | - | 64 / 512 |
| 10.253.020 | 10 ml | 102 x 15 mm | Etiqueta de plástico, transparente, envase individual en blíster | esterilizado | 100 / 500 |
| 10.253.021 | 10 ml | 102 x 15 mm | Etiqueta de papel para escritura, envase individual en blíster | esterilizado | 100 / 500 |

Encontrará más consumibles para la preanalítica de orinas en www.sarstedt.com

* Nueva introducción prevista 2.º trimestre de 2024

Si tiene alguna duda, estaremos encantados de atenderle.

Visite también nuestro sitio web: www.sarstedt.com

SARSTEDT S.A.U.

Camí de Can Grau, 24
Pol. Ind. Valldoriolf
08430 La Roca del Vallès

Tel.: +34 93 846 41 03
Fax: +34 93 846 39 78

info.es@sarstedt.com
www.sarstedt.com



Más información, vídeos
y pedido de muestras:
sarstedt.com/nft-es