

Work & Flow

Da coleta de amostras
à análise de molecular



Workflow de diagnóstico molecular da SARSTEDT


Consumíveis para o processo de trabalho ideal

Combinação perfeita

A SARSTEDT oferece soluções de produtos perfeitamente qualificadas para a sua rotina de diagnóstico molecular. Nosso foco está sempre - mas não apenas - na qualidade consistente. Cada um dos nossos produtos é adaptado aos outros componentes - desde a amostragem ao isolamento e à análise.

Os nossos consumíveis impressionam pela sua pureza única e com a nossa produção própria - fabricada na Alemanha - elevamos a qualidade dos seus processos de trabalho a um novo nível.

Aproveite as sinergias que os produtos para a rotina de diagnóstico molecular oferecem. Tem perguntas? Ficaremos felizes em ajudar!

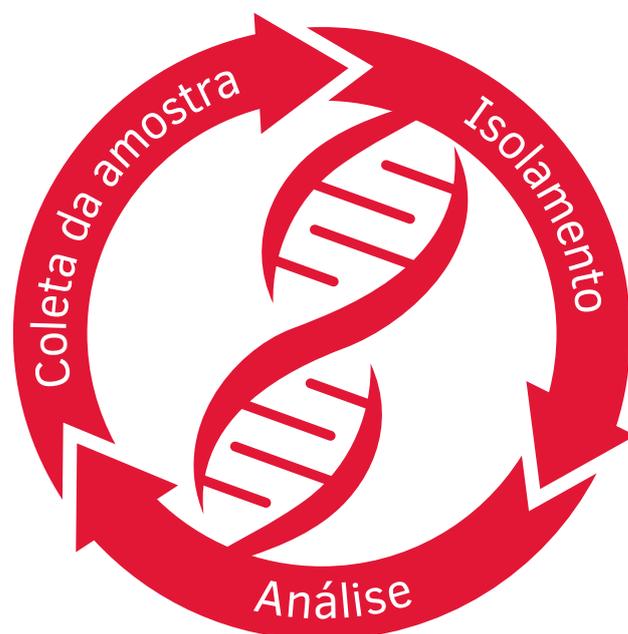

Workflow de diagnóstico molecular on-line

molecular-workflow.sarstedt.com/en

O Sistema S-Monovette®

Estabilização de amostras de cfDNA e RNA



Amostras estabilizadas – desde o início

Amostras de sangue inalteradas e estáveis são a base de resultados de análises biológicas moleculares confiáveis e, portanto, reprodutíveis. Portanto, o sistema S-Monovette® da SARSTEDT garante a coleta de sangue venoso de acordo com os mais altos padrões. O sistema de aspiração patenteado reduz ao mínimo a hemólise da amostra.

Os SARSTEDT S-Monovettes oferecem um desempenho de estabilização único no mercado:

S-Monovette® cfDNA Exact

- Estabilização confiável da amostra - até 14 dias a 4°C – 37°C
- Nenhuma entrada de gDNA de células nucleadas: resultados de análise exatos e não adulterados
- Menor hemólise - melhor qualidade de amostra possível - resultados confiáveis

S-Monovette® RNA Exact

- Estabilização confiável da amostra:
 - em temperatura ambiente por até 5 dias
 - refrigerado (8°C) até 14 dias
 - estável por muitos anos a -80 °C
- Resultados de análise mais confiáveis através da estabilização consistentemente confiável de diferentes transcrições e maiores rendimentos de RNA
- Isolamento de RNA significativamente mais rápido em comparação com sistemas convencionais - gerenciamento de tempo eficaz - resultados mais rápidos



Mais informações on-line:
molecular-workflow.sarstedt.com/en/molecular-biologic-monovette

Automatizado é melhor

Placas Deep Well – compatíveis com dispositivos de isolamento de amostras KingFisher™





Alta compatibilidade com os dispositivos de isolamento de amostras mais comuns

A tecnologia laboratorial moderna impõe, com razão, altas exigências aos consumíveis associados. A compatibilidade desempenha um papel importante. Nossa nova geração de placas Deep Well é compatível com isolamento automatizado de amostras no KingFisher™ e em muitos outros dispositivos de isolamento de amostras.

Sistemas compatíveis:

- KingFisher™ Flex (Thermo Scientific™)
- KingFisher™ Apex (Thermo Scientific™)
- KingFisher™ Duo Prime (Thermo Scientific™)
- KingFisher™ Presto (Thermo Scientific™)
- Bio Sprint 96 (Qiagen)
- Chemagic™ Prime™ (PerkinElmer)

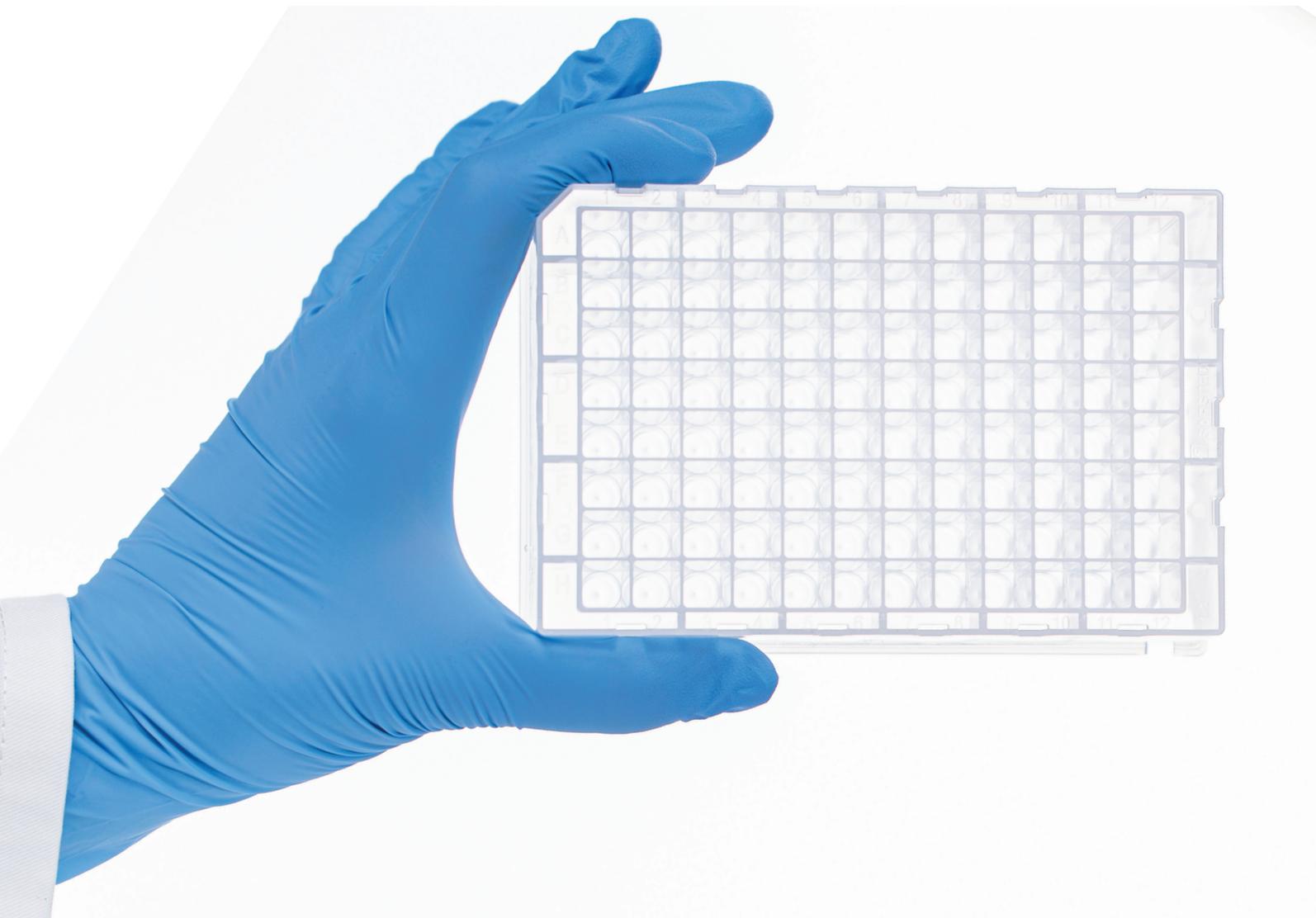

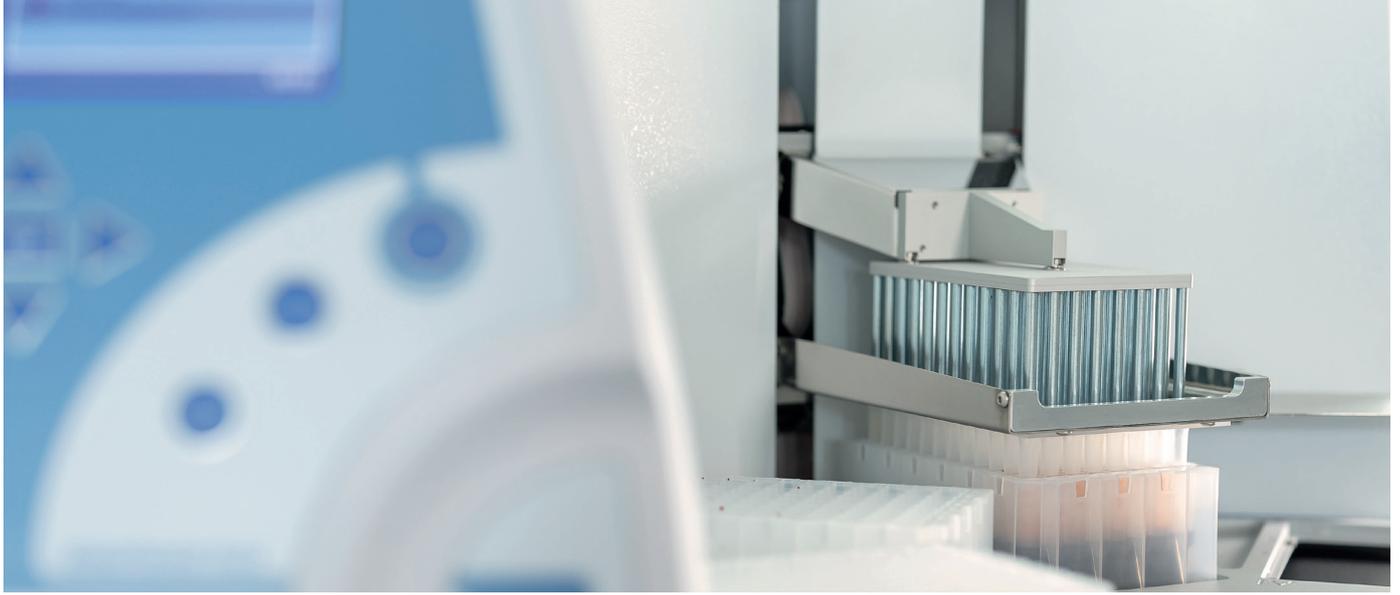


Incrivelmente bom

- Formato e dimensões altamente estáveis para um ajuste consistentemente perfeito na sua automação
- Design de acordo com o padrão ANSI/SLAS para máxima compatibilidade com uma ampla gama de equipamentos
- Poços com geometria otimizada – melhor mistura de amostras – trabalho mais eficiente

- Produzido em polipropileno para alta resistência a produtos químicos
- Geometria inferior otimizada para melhor recuperação de amostras – usando o material da amostra da forma mais eficiente possível
- Adequado para uso em uma ampla faixa de temperatura de $-86\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Certificação PCR Performance Tested para proteção contra contaminação.

Ainda melhor juntos

Para a separação automatizada por partículas magnéticas, também oferecemos ponteiras perfeitamente compatível.

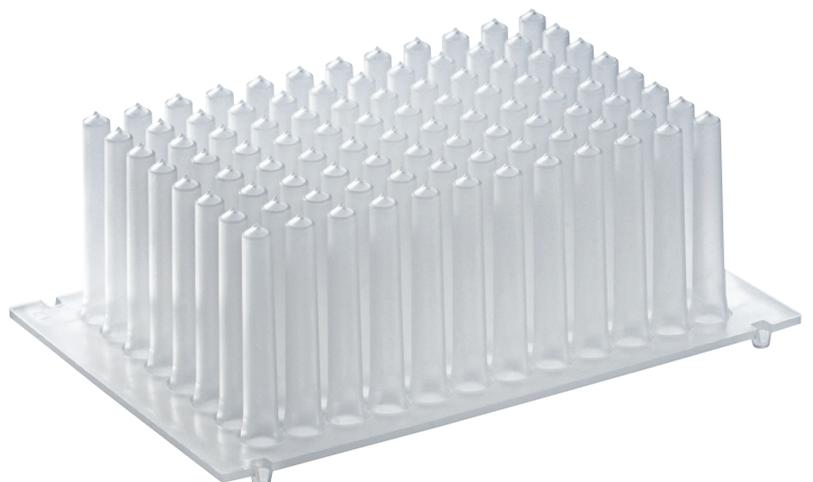


Experimente grátis e sem compromisso!

molecular-workflow.sarstedt.com/en/deep-well-platten

Confiabilidade máxima

Placas PCR da SARSTEDT

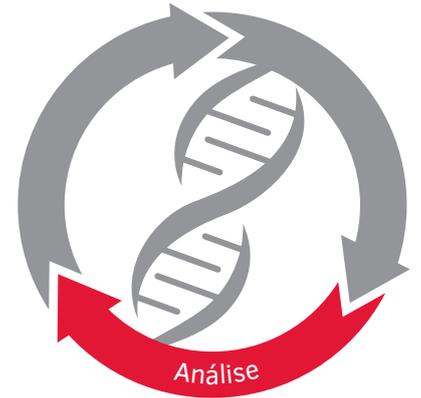


Mais informações on-line:

molecular-workflow.sarstedt.com/en/pcr-plates

Para obter resultados mais precisos na análise de amostras *in vitro*, a SARSTEDT oferece uma ampla gama de consumíveis especialmente projetados para a biologia molecular:

- Placas “brancas” otimizadas para melhor sensibilidade qPCR - dados mais precisos e melhor reprodutibilidade
- Opções de baixa ligação de DNA e proteínas para recuperação máxima de amostras
- Teste de 100% de estanqueidade de cada poço individual no processo de produção para máxima segurança com amostras valiosas
- Produção em condições de sala limpa – testes biológicos realizados por laboratórios independentes – pureza máxima

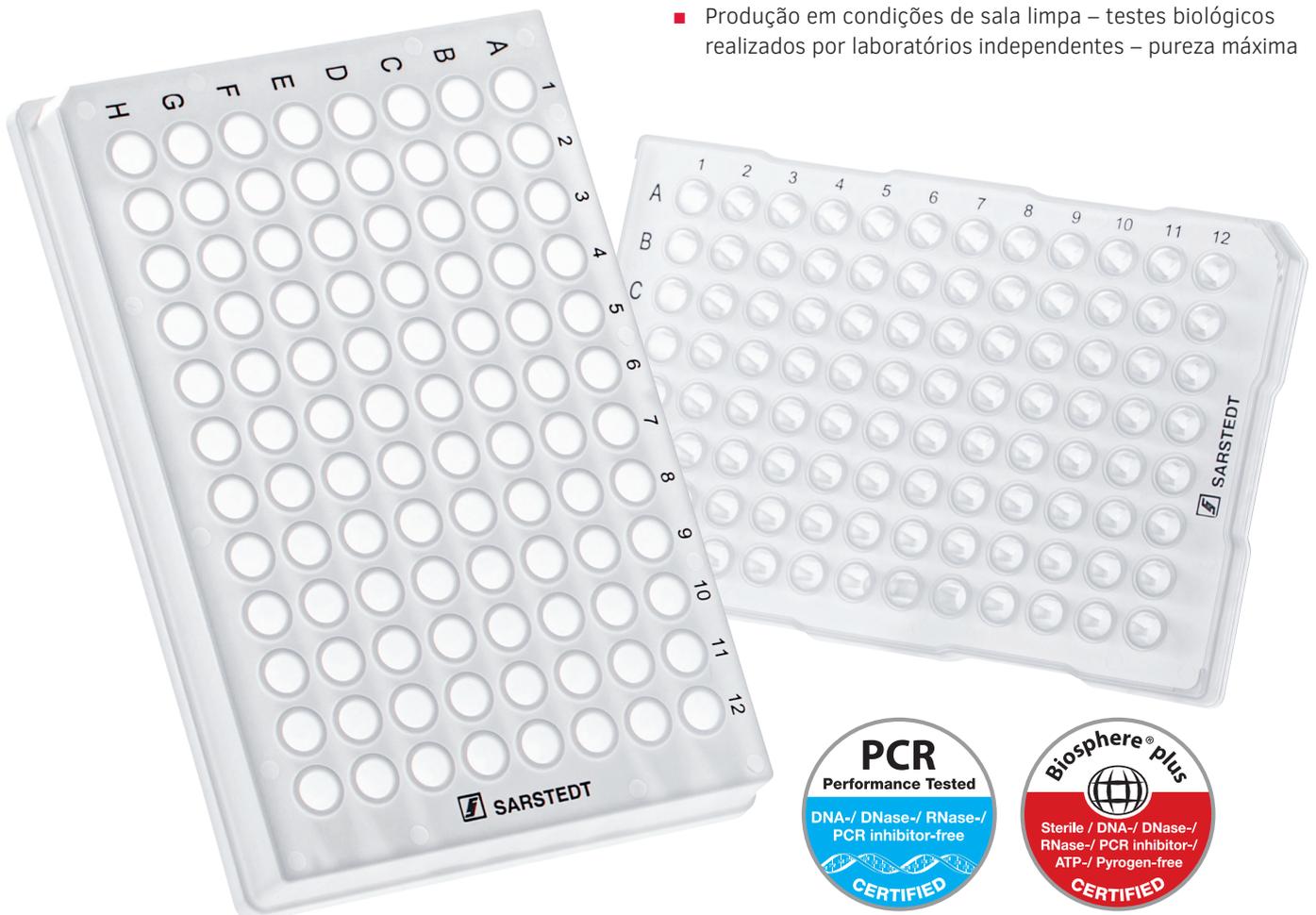

Workflow de diagnóstico molecular da SARSTEDT

Aproveite as vantagens dos nossos consumíveis coordenados!



O fluxo de trabalho de diagnóstico molecular on-line

molecular-workflow.sarstedt.com/en

Em caso de dúvidas:
Teremos prazer em ajudar!

Visite o nosso site:
www.sarstedt.com

SARSTEDT Ltda.

Rodovia Marechal Rondon, km 126
Avecuia
CEP 18546-412
Porto Feliz – SP

Tel: +55 11 4152 2233

info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com



Mais informações,
vídeos e conselhos:
molecular-workflow.sarstedt.com