

Get it all sorted!

In un attimo con il nuovissimo BL 3500



Automazione di laboratorio



Designn compatto ed ergonomico

Grazie alle sue dimensioni compatte di soli 1385 x 905 x 1455 mm, il dispositivo BL 3500 si adatta perfettamente anche ad ambienti di laboratorio di dimensioni ridotte. Lo smistatore BL 3500 combina la complessità tecnica con un design snello e ottimizzato.

Capacità di elaborazione di campioni: 3.500 provette l'ora

Velocità e affidabilità sono fattori essenziali nella selezione dei campioni. Anche in questo caso, il dispositivo BL 3500 stabilisce nuovi standard.

Con una capacità di elaborazione dei campioni fino a 3.500 provette l'ora, lo smistatore BL 3500 è uno dei modelli più veloci sul mercato e pertanto fa parte dell'attrezzatura fondamentale di ogni laboratorio moderno, grande o piccolo che sia.

Funzione loop intelligente

Un campione sfuso non è chiaramente identificabile o non è ancora stato preso in carico dal LIS? Nessun problema con la funzione di loop intelligente del dispositivo BL 3500. Questo perchè la reintroduzione automatica consente al BL3500 di ricevere i dati dal LIS per la successiva elaborazione. Se anche in questo caso l'elaborazione non va a buon fine, il campione viene espulso in un contenitore separato, con una procedura semplice e senza complicazioni.



Più efficienza in laboratorio

Il tempo è un fattore essenziale nella routine quotidiana di laboratorio. Con il nuovo dispositivo di smistamento BL 3500, il personale di laboratorio può contare su un aiuto affidabile che offre un supporto efficiente e a prova di errore per lo smistamento dei campioni più veloce che mai.

Trasporto e smistamento rapido dei campioni



Riduzione dei tempi di elaborazione dei campioni (TAT) grazie all'alimentazione diretta dei campioni nel dispositivo BL 3500 con il sistema di trasporto campioni Tempus600®

Tutte le caratteristiche in sintesi:
s-monovette-tempus600.sarstedt.com/#tempus600



Tutti i vantaggi in sintesi: il nuovo BL 3500



Efficienza e risparmio di tempo

- Consente di accelerare i risultati delle analisi per una cura tempestiva del paziente
- I campioni urgenti possono essere elaborati in via prioritaria, in modo da garantire una diagnosi veloce e un rapido avvio del trattamento e dell'assistenza dei pazienti
- Il design compatto libera spazio prezioso in laboratorio e si adatta perfettamente ai concetti di laboratorio esistenti



Facilità d'uso

- L'intuitiva interfaccia utente consente un utilizzo semplice ed efficiente, riduce i requisiti di formazione e minimizza il rischio di errori operativi
- Ambiente di lavoro ottimizzato: Il design ergonomico riduce gli sforzi del personale e favorisce un ambiente di lavoro più confortevole e quindi più produttivo
- La visualizzazione chiara delle destinazioni di distribuzione contribuisce in modo significativo a ridurre al minimo gli errori operativi



Precisione

- Minimizzazione del rischio: L'elaborazione automatizzata e la scansione dei codici a barre riducono il rischio di scambio dei campioni e di altri errori
- Maggiore sicurezza e affidabilità durante le analisi: I campioni etichettati in modo errato vengono rilevati in modo affidabile e non raggiungono l'analizzatore




Flessibilità

- Adattabilità: Grazie alla compatibilità con vari tipi e dimensioni di campioni, i laboratori possono utilizzare in modo flessibile provette di diversi produttori
- Adattabilità: I vari criteri di selezione possono essere adattati alle diverse routine quotidiane e impostati in modo flessibile



Ridotto carico di lavoro per gli addetti

- Consente di utilizzare il personale in modo più efficiente per le attività prioritarie
- La riduzione dei controlli manuali sui campioni riduce il carico di lavoro

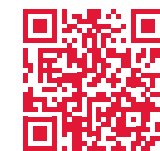

Il dispositivo BL 3500 di SARSTEDT è il complemento indispensabile per il lavoro quotidiano in laboratorio. Tutte le caratteristiche in sintesi su: bl3500.sarstedt.com



Riserva di campioni per un funzionamento continuo e ininterrotto

Maniglia di trasporto bloccabile* per l'utilizzo con una sola mano



Possibilità di alimentazione dei campioni tramite Tempus600®



Alimentazione dei campioni urgenti (campioni STAT) tramite inserimento separato



Funzione loop: Reintroduzione automatica dei campioni non riconosciuti o senza richiesta dal LIS all'area di raccolta

Registrazione automatica dei campioni nel sistema informatico di laboratorio (LIS)

* Brevetto depositato

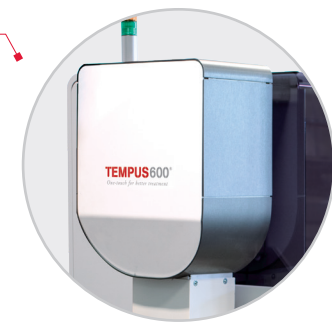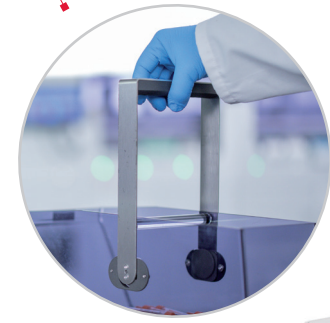

Funzionamento intuitivo

Visualizzazione chiara e personalizzata delle destinazioni di distribuzione sul display

Design ergonomico e costruzione snella

Verifica della correttezza dei codici a barre e della tipologia delle provette

Compatibile con tutti i tipi di campioni comuni

Criteri di smistamento personalizzabili

Il workflow pre-analitico SARSTEDT

Approfittate della sinergia dei nostri sistemi.

Scoprite le soluzioni a 360° per la preanalitica di SARSTEDT:



workflow.sarstedt.com



In caso di domande,
siamo a disposizione!

Visitate anche la nostra pagina Internet:
www.sarstedt.com

SARSTEDT S.r.l.

Via Leonardo Da Vinci, 97
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

Tel: +39 02 38292413

Fax: +39 02 38292380

info.it@sarstedt.com

www.sarstedt.com



Ulteriori informazioni e video:
bl3500.sarstedt.com