

Sistemi di prelievo ematico

per la pediatria



Pediatria

I bambini – la categoria di pazienti più sensibili – richiedono un sistema di prelievo ematico speciale e delicato



Neonati

I nostri pazienti più piccoli

Le esigenze di un sistema di prelievo ematico riservato a questa categoria di pazienti sono uniche. Ci siamo perciò specializzati su tali bisogni, sviluppando sistemi di prelievo ematico ottimali che consentono un prelievo delicato e quanto più possibile indolore nei pazienti piccoli e molto piccoli.

Ci siamo dedicati soprattutto a ridurre al massimo il volume di riempimento per minimizzare la perdita diagnostica di sangue. In base all'età, al peso e al volume di sangue è possibile scegliere tra un ricco assortimento di prodotti per il prelievo capillare e anche venoso.



Bambini



Bambini in età scolare

Abbiamo la soluzione per le diverse esigenze delle varie fasce di età



Neonatologia – Neonati

Volume di campione minimo
per i pazienti più piccoli



Micro-ago e micro-provette

Il micro-ago venne ideato per i bisogni particolari della neonatologia ed è munito di un'impugnatura scanalata che garantisce una punzione sicura e ottimale. È disponibile in tre diametri differenti.

Il tipo di ago corto consente di raccogliere un volume minimo di campione. Oltre alla punzione sicura, l'impugnatura del micro-ago offre anche la possibilità di ruotare in vena l'ago. In questo modo è possibile rimuovere facilmente un blocco dell'apertura dell' ago. Apposite micro-provette con tappo a vite oppure tappi e microvette per quantità di campione minime sono disponibili in diverse preparazioni.

Il range del volume nominale varia da 100 µl a 1,3 ml max., a seconda del tipo di provetta e di preparazione.

Safety-Heel®

Malattie metaboliche ed endocrinopatie congenite andrebbero riconosciute precocemente per poter introdurre un trattamento efficace e adeguato.

Per questo occorre eseguire un prelievo ematico attraverso uno „screening neonatale“ (nella maggior parte dei casi con una punzione sul tallone). Con le lancette tradizionali la punzione viene eseguita con un movimento verticale e il rischio di lesioni (perforazione di diversi strati cutanei fino all'osso) e di formazione di ematomi è molto elevato. Spesso si tratta di una procedura dolorosa, con la lancetta di iniezione

Safety-Heel® però avete un'opportunità di ridurre il dolore e ottimizzare il prelievo di sangue.

Safety-Heel® impedisce la formazione di ematomi grazie a una via di incisione semicircolare e a una profondità di incisione minima, provvedendo così a uno screening essenzialmente confortevole del vostro piccolo paziente.



Micro-ago, Micro-provette & Safety Heel®



Facile da utilizzare

L'impugnatura scanalata consente la punzione facile e sicura. Per il gocciolamento è disponibile un'apposita micro-provetta.



Safety-Heel®

Il prelievo ematico delicato con la lancetta nel tallone ...



Bambino

Prelievo di sangue capillare
per i bambini piccoli



Lancetta di sicurezza e Microvette®

A seconda delle esigenze, le Microvette® sono disponibili con forma interna del contenitore cilindrica o conica e con una gamma di volumi che varia da 100 a 500 µl.

Il prelievo capillare può essere eseguito mediante un cosiddetto capillare end-to-end o tramite prelievo con bordo di raccolta.

In più le Microvette possono essere utilizzate anche come contenitori di gocciolamento per il prelievo ematico venoso aperto.

Le diverse varianti delle lancette di sicurezza consentono all'operatore di adattare in modo ideale la profondità della puntura e la quantità di sangue necessario alle condizioni anatomiche dei piccoli pazienti.




Microvette[®], Lancetta di sicurezza & Microvette[®] APT



Microvette[®] – Un prodotto, tre applicazioni

Le Microvette[®] consentono un prelievo ematico con il capillare end-to-end, con il bordo di raccolta oppure come contenitore di gocciolamento.

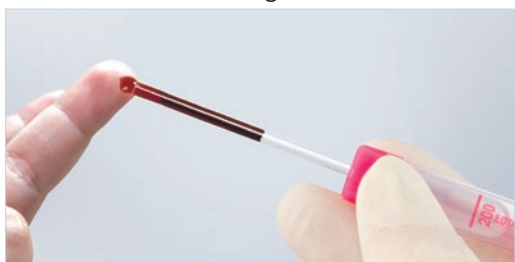

Microvette[®] 100/200 –
Prelievo ematico con capillare end-to-end



Microvette[®] 300/500 – Prelievo ematico
con il bordo di raccolta



Microvette[®] come
contenitore di gocciolamento

Diverse possibilità di punzione con la lancetta die sicurezza



Bambino – Bambino in età scolare

Prelievo di sangue venoso con
minimo volume di campione



Ago Safety-Multifly® e S-Monovette®

La sensibilità dei moderni sistemi di analisi consente di ridurre il volume di campione necessario, anche per esami di routine su vasta scala. Grazie allo speciale design con scostamenti ridotti e al volume nominale esiguo, la S-Monovette® pediatrica soddisfa in modo ideale questi elevati requisiti. Inoltre, grazie alla tecnica ad aspirazione che consente di eseguire di un prelievo ematico delicato, la S-Monovette® pediatrica rappresenta una soluzione ottimale per le difficili condizioni venose dei pazienti pediatrici.







S-Monovette® & Safety- Multifly®



Sicurezza e comfort ottimali per paziente e operatore

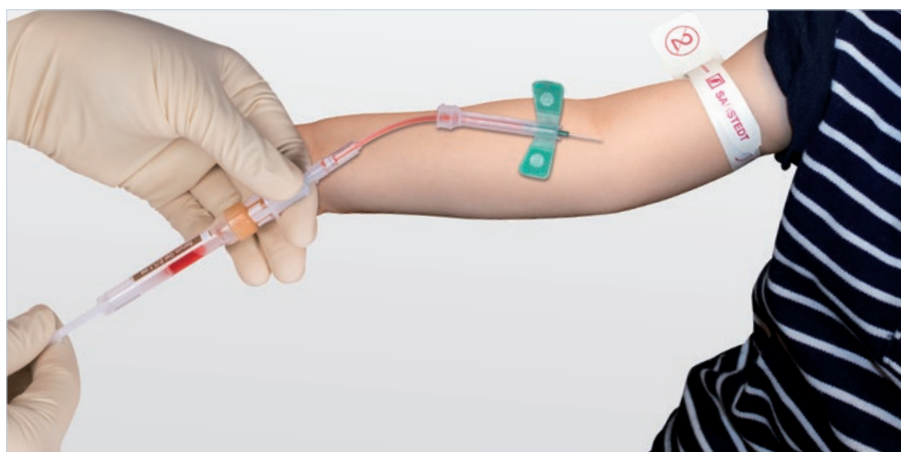

S-Monovette® e Microvette® (incluso adattatore idoneo)

	Siero	Siero-Gel	Litio-eparina	Gel litio-eparina	EDTA	Fluoruro	Coagulazione Citrato	VES
								
S-Monovette® 1,1 / 1,2 ml 8 mm Ø_{1,3}	06.1663.001	06.1667.001	06.1666.001	06.1669.001	06.1664.001	06.1665.001	06.1668.001	05.1079*
Microvette® 500 µl_{1,2}	20.1343	20.1344	20.1345	20.1346	20.1341			
Microvette® 300 µl_{1,2}	20.1308		20.1309			20.1307		
Microvette® 200 µl_{1,2}	20.1290	20.1291	20.1292		20.1288	20.1289		
Microvette® 100 µl_{1,2}	20.1280		20.1282		20.1278			
Microvette® CB 200 BSG^{1,2}								18.1325


* S-Monovette® 2 ml, 66 x 11 mm Ø

¹ idoneo per adattatore 75 x 13, cod. articolo 55.1571

² idoneo per adattatore 75 x 13, cod. articolo 55.525.003

³ idoneo per adattatore 65 x 13, cod. articolo 55.1572


Micro-provette

	Siero	Siero-Gel	Litio-eparina	EDTA	Fluoruro	Coagulazione Citrato
						
Micro-provetta 1,3 ml con tappo	41.1501.005	41.1500.005	41.1503.005	41.1504.005	41.1505.005	41.1506.005
Micro-provetta 1,0 ml con tappo						41.1506
Micro-provetta 0,5 ml con tappo						41.1506.002
Micro-provetta 1,3 ml con tappo a vite	41.1392.005		41.1393.005	41.1395.005	41.1394.005	41.1350.005
Micro-provetta 1,3 ml con membrana tappo a vite				41.3395.005		
Micro-provetta 1,1 ml con tappo a vite		41.1378.005				




SARSTEDT

Micro-ago, lancetta di sicurezza, lancetta di iniezione Safety-Heel®, Safety-Multifly®

	21 G x 3/4"	23 G x 3/4"	25 G x 3/4"	28 G	Lama 1,5 diritta	Lama 1,75 incisione	Lama 2,5 incisione
Micro-ago	85.921	85.923	85.925				
Lancetta di sicurezza				85.1015	85.1019		
Safety-Heel® lancetta di incisione						85.1023	85.1022
Safety-Multifly®	85.1638.205	85.1640.205	85.1642.205				

Portaprovette VES per Microvette® CB 200

Codice articolo	Materiale	Denominazione del prodotto	Confezione pezzo/cartone
90.1091	Plastica	Portaprovette VES per Microvette® CB 200	1

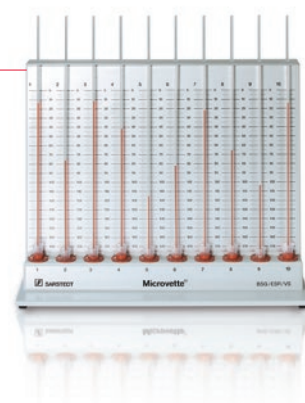

Monovette® per urina

Codice articolo	Volume in ml	Lunghezza provetta / Ø in mm	Denominazione del prodotto	Confezione pezzo/cartone
10.250.001	3,2	75/13	con etichetta di carta, inclusa punta per aspirazione	512



SARSTEDT S.r.l.

Via Leonardo Da Vinci, 97
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

Tel: +39 02 38292413

Fax: +39 02 38292380

info.it@sarstedt.com

www.sarstedt.com

Workflow preanalitico made by SARSTEDT

Approfittate della sinergia
dei nostri sistemi.

Scoprite le
soluzioni a 360°
per la preanalitica
di SARSTEDT



workflow.sarstedt.com



In caso di domande,
siamo a disposizione!